

# NextSeq 550Dx

## Guida alla preparazione della sede di installazione dello strumento

Introduzione	3
Consegna e installazione	3
Requisiti di laboratorio	4
Requisiti elettrici	7
Gruppo di continuità (UPS)	7
Vincoli ambientali	8
Considerazioni relative alla rete informatica	8
Software antivirus	12
Apparecchiature e materiali di consumo forniti dall'utente	12
Cronologia revisioni	14
Assistenza Tecnica	



Questo documento e il suo contenuto sono di proprietà di Illumina, Inc. e delle aziende ad essa affiliate ("Illumina") e sono destinati esclusivamente ad uso contrattuale da parte dei clienti di Illumina, per quanto concerne l'utilizzo dei prodotti qui descritti, con esclusione di qualsiasi altro scopo. Questo documento e il suo contenuto non possono essere usati o distribuiti per altri scopi e/o in altro modo diffusi, resi pubblici o riprodotti, senza previa approvazione scritta da parte di Illumina. Mediante questo documento, Illumina non trasferisce a terzi alcuna licenza ai sensi dei suoi brevetti, marchi, copyright, o diritti riconosciuti dal diritto consuetudinario, né diritti simili di alcun genere.

Al fine di assicurare un uso sicuro e corretto dei prodotti qui descritti, le istruzioni riportate in questo documento devono essere scrupolosamente ed esplicitamente seguite da personale qualificato e adeguatamente formato. Leggere e comprendere a fondo tutto il contenuto di questo documento prima di usare tali prodotti.

LA LETTURA INCOMPLETA DEL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO E IL MANCATO RISPETTO DI TUTTE LE ISTRUZIONI IN CONTENUTE POSSONO CAUSARE DANNI AL/I PRODOTTO/I, LESIONI PERSONALI A UTENTI E TERZI E DANNI MATERIALI E RENDERANNO NULLA QUALSIASI GARANZIA APPLICABILE AL/I PRODOTTO/I.

ILLUMINA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO IMPROPRIO DEL/DEI PRODOTTO/I QUI DESCRITTI (INCLUSI SOFTWARE O PARTI DI ESSO).

© 2019 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Illumina, Inc. o dei rispettivi proprietari. Per informazioni specifiche sui marchi di fabbrica, visitare la pagina Web [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Introduzione

La presente guida fornisce le specifiche e le linee guida per la preparazione della sede per l'installazione e per il funzionamento dello strumento NextSeq™ 550Dx Illumina®:

- ▶ Requisiti di spazio nel laboratorio
- ▶ Requisiti elettrici
- ▶ Vincoli ambientali
- ▶ Requisiti del computer
- ▶ Apparecchiature e materiali di consumo forniti dall'utente

## Considerazione relative alla sicurezza

Per informazioni importanti sugli aspetti relativi alla sicurezza, vedere la *Guida alla sicurezza e conformità dello strumento NextSeq 550Dx* (documento n. 100000009868).

## Risorse aggiuntive

Dal sito Web di Illumina è possibile scaricare la seguente documentazione.

Risorsa	Descrizione
<i>Guida alla sicurezza e conformità dello strumento NextSeq 550Dx</i> (documento n. 100000009868)	Fornisce informazioni relative agli aspetti di sicurezza del funzionamento, alle dichiarazioni di conformità e alle etichette dello strumento.
<i>Guida alla conformità del lettore RFID</i> (documento n. 1000000030332)	Fornisce informazioni sul lettore RFID nello strumento, certificazioni di conformità e considerazioni relative alla sicurezza.
<i>Guida di consultazione dello strumento NextSeq 550Dx in modalità di ricerca</i> (documento n. 1000000041922)	Fornisce istruzioni per il funzionamento dello strumento e le procedure di risoluzione dei problemi. Da utilizzare quando lo strumento NextSeq 550Dx è in modalità di ricerca con NextSeq Control Software (NCS) v3.0.
<i>Guida del sistema NextSeq 550</i> (documento n. 15069765)	Fornisce istruzioni per il funzionamento dello strumento e le procedure di risoluzione dei problemi. Da utilizzare quando lo strumento NextSeq 550Dx è in modalità di ricerca con NextSeq Control Software (NCS) v4.0 o versione successiva.
<i>Guida di consultazione dello strumento NextSeq 550Dx</i> (documento n. 100000009513)	Fornisce una panoramica sui componenti dello strumento, sulle istruzioni per far funzionare lo strumento e sulle procedure di manutenzione e di risoluzione dei problemi.

Consultare le [pagine di supporto per NextSeq 550Dx](#) sul sito Web Illumina per accedere alla documentazione, ai download del software, alla formazione online e alle domande frequenti (FAQ).

## Consegna e installazione

Il personale autorizzato consegna lo strumento, disimballa i componenti e posiziona lo strumento sul banco da laboratorio. Assicurarsi che lo spazio e il banco da laboratorio siano preparati prima della consegna.

Per l'installazione, la manutenzione e l'assistenza, è richiesto l'accesso alle porte USB dello strumento.



### ATTENZIONE

Lo strumento può essere disimballato, installato o spostato unicamente da personale debitamente autorizzato. Una manipolazione non appropriata dello strumento può incidere sull'allineamento o danneggiarne i componenti.

Un rappresentante Illumina installerà e preparerà lo strumento. Quando si collega lo strumento a un sistema di gestione dei dati o a una destinazione remota in rete, assicurarsi di definire il percorso per l'archiviazione dei dati prima della data dell'installazione. Il rappresentante Illumina può testare il processo del trasferimento dati durante l'installazione.



### ATTENZIONE

**Non** spostare lo strumento dopo l'installazione e la preparazione dello strumento da parte del rappresentante Illumina. Uno spostamento dello strumento non eseguito nel modo appropriato può incidere sull'allineamento ottico e compromettere l'integrità dei dati. Nel caso sia necessario spostare lo strumento, rivolgersi al rappresentante Illumina.

## Dimensioni e contenuto della cassa di spedizione

Lo strumento NextSeq 550Dx è spedito in una cassa di spedizione. Utilizzare le dimensioni riportate di seguito per determinare la larghezza minima delle porte necessaria al passaggio della cassa di spedizione.

Misura	Dimensioni della cassa di spedizione
Altezza	97 cm
Larghezza	90 cm
Profondità	94 cm
Peso	165 kg


La cassa di spedizione contiene lo strumento e i componenti elencati di seguito:

- ▶ Flacone dei reagenti usati
- ▶ Cartuccia dei reagenti di lavaggio e cartuccia dei tamponi di lavaggio
- ▶ Adattatore BeadChip
- ▶ Cavo di alimentazione
- ▶ Kit accessori, contenente i componenti seguenti:
  - ▶ Tastiera e mouse
  - ▶ *Inserto della confezione dello strumento NextSeq 550Dx (documento n. 1000000041523)*

## Requisiti di laboratorio

Questa sezione fornisce le specifiche e i requisiti per la configurazione dello spazio del laboratorio. Per maggiori informazioni, vedere [Vincoli ambientali a pagina 8](#).

## Dimensioni dello strumento

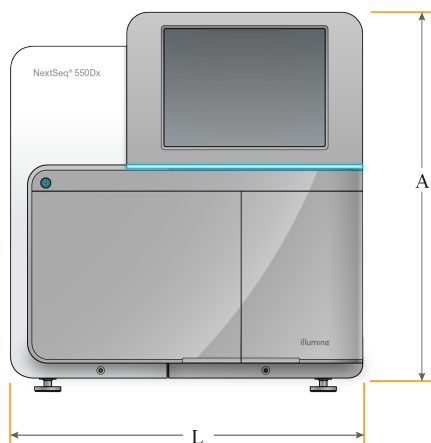

Misura	Dimensioni dello strumento (installato)
Altezza	58,5 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	69 cm
Peso	84 kg

## Requisiti di posizionamento

Posizionare lo strumento in modo da permettere ventilazione corretta, accesso all'interruttore di alimentazione e alla presa elettrica e accesso per la manutenzione dello strumento.

- ▶ Accertarsi di poter raggiungere senza difficoltà il lato sinistro dello strumento per premere l'interruttore di alimentazione situato sul pannello posteriore.
- ▶ Posizionare lo strumento in modo da poter staccare rapidamente il cavo di alimentazione dalla presa.
- ▶ Verificare che lo strumento sia accessibile da tutti i lati.

Accesso	Spazio libero minimo
Lati	Lasciare almeno 61 cm di spazio libero su entrambi i lati dello strumento.
Parte posteriore	Lasciare almeno 10,2 cm di spazio libero dietro lo strumento.
Parte superiore	Lasciare almeno 61 cm di spazio libero sopra lo strumento.



### ATTENZIONE

Uno spostamento dello strumento non eseguito nel modo appropriato può incidere sull'allineamento ottico e compromettere l'integrità dei dati. Nel caso sia necessario spostare lo strumento, rivolgersi al rappresentante Illumina.

## Linee guida per l'allestimento del banco da laboratorio

Lo strumento comprende elementi ottici di precisione. Collocare lo strumento su un banco da laboratorio solido lontano da fonti di vibrazione.

Larghezza	Altezza	Profondità	Ruote
122 cm	91,4 cm	76,2 cm	Facoltativo

## Linee guida relative alle vibrazioni

Attenersi alle linee guida seguenti per ridurre al minimo le vibrazioni durante il sequenziamento e ottimizzare le prestazioni:

- ▶ Collocare lo strumento su un banco da laboratorio solido.
- ▶ Non collocare sul banco altre apparecchiature che potrebbero produrre vibrazioni, quali shaker, vortex, centrifuga o strumenti con ventole pesanti.
- ▶ Non posizionare oggetti sopra lo strumento.
- ▶ Quando lo strumento è in fase di sequenziamento, non aprire lo sportello dello scomparto reagenti, lo sportello dello scomparto tamponi, il pannello di servizio destro o lo sportello della cella a flusso.

## Allestimento del laboratorio per le procedure della PCR

Alcuni metodi di preparazione delle librerie richiedono il processo di reazione di polimerizzazione a catena (Polymerase Chain Reaction, PCR).

Per impedire la contaminazione da PCR, è necessario creare spazi dedicati e procedure di laboratorio prima di iniziare a lavorare nel laboratorio. I prodotti della PCR possono contaminare i reagenti, gli strumenti e i campioni causando risultati inaccurati e ritardi nel normale funzionamento.

### Creazione di aree di laboratorio per pre-PCR e post-PCR

- ▶ Creare un'area pre-PCR per i processi di pre-PCR.
- ▶ Creare un'area post-PCR per elaborare i prodotti per la PCR.
- ▶ Non utilizzare lo stesso lavandino per lavare i materiali di pre-PCR e post-PCR.
- ▶ Non utilizzare lo stesso sistema di purificazione dell'acqua per i processi di pre-PCR e post-PCR.
- ▶ Conservare i materiali usati nei protocolli di pre-PCR nella zona di pre-PCR e portarli nella zona post-PCR secondo necessità.

### Apparecchiature e materiali dedicati

- ▶ Non utilizzare le stesse apparecchiature e gli stessi materiali per i processi di pre-PCR e post-PCR. Dedicare un set di apparecchiature e materiali separati in ciascuna area.
- ▶ Creare spazi di conservazione dedicati per i materiali di consumo utilizzati in ciascuna area.

## Spazio richiesto per la conservazione dei materiali di consumo per il sequenziamento

Elemento (uno per corsa)	Requisiti di archiviazione
Tampone di diluizione della libreria	tra -25 °C e -15 °C
Cartuccia di reagenti	tra -25 °C e -15 °C
Cartuccia di tamponi	tra 15 °C e 30 °C
Cartuccia della cella a flusso*	tra 2 °C e 8 °C

\* La cartuccia della cella a flusso NextSeq 550Dx High Output v2.5 è spedita a temperatura ambiente.

## Requisiti elettrici

### Specifiche di alimentazione

Tipo	Specifica
Tensione di rete	100-240 V c.a. a 50/60 Hz
Potenza nominale	600 Watt, massimo

### Prese di alimentazione

L'impianto elettrico del laboratorio deve essere dotato di quanto segue:

- ▶ **Per alimentazione a 100-120 V c.a.:** è richiesta una linea elettrica dedicata da 15 amp, dotata di massa, con tensione e impianto di messa a terra adeguati. Nord America e Giappone - Presa: NEMA 5-15
- ▶ **Per alimentazione a 220-240 V c.a.:** è richiesta una linea elettrica dedicata da 10 amp, dotata di massa, con tensione e impianto di messa a terra adeguati. Se si riscontrano fluttuazioni di tensione superiori al 10%, è necessario installare un regolatore di tensione.

### Messa a terra protettiva



Lo strumento è collegato alla messa a terra protettiva attraverso il telaio. Il conduttore di protezione del cavo di alimentazione riporta il limite della messa a terra protettiva a un valore di riferimento sicuro. Il conduttore di messa a terra protettiva del cavo di alimentazione deve essere in buone condizioni di funzionamento quando si utilizza questo dispositivo.

### Cavi di alimentazione

Lo strumento è dotato di un connettore con standard internazionale IEC 60320 C20 ed è fornito di un cavo di alimentazione specifico per il paese.

I livelli di tensione pericolosi vengono eliminati dallo strumento solo quando il cavo di alimentazione è scollegato dalla fonte di alimentazione c.a..

Per acquistare prese o cavi di alimentazione equivalenti conformi alle normative locali, rivolgersi a un fornitore terzo come Interpower Corporation ([www.interpower.com](http://www.interpower.com)).



#### ATTENZIONE

Non utilizzare mai una prolunga per collegare lo strumento alla presa di alimentazione.

### Fusibili

Lo strumento non contiene fusibili sostituibili dall'utente.

### Gruppo di continuità (UPS)

Si consiglia vivamente di dotarsi di un gruppo di continuità (Uninterruptible Power Supply, UPS). Illumina non è responsabile dei problemi riscontrati durante le corse dovuti a interruzioni elettriche, indipendentemente dal fatto che lo strumento sia collegato o meno a un gruppo di continuità. Con un generatore standard, l'erogazione di elettricità spesso *non* è ininterrotta ed è soggetta a brevi interruzioni, prima che l'alimentazione riprenda.

La tabella seguente elenca le raccomandazioni consigliate per regione geografica.

Specifica	APC Smart UPS 2.200 VA LCD 120 V (Nord America)	APC Smart UPS 1.500 VA LCD 100 V (Giappone)	APC Smart UPS 2.200 VA LCD 230 V (Internazionale)
Potenza massima	1.920 W	980 W	1.980 W
Tensione in ingresso (nominale)	100-120 V c.a.	100 V c.a.	220-240 V c.a.
Frequenza di ingresso	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Connessione in ingresso	NEMA 5-20P	NEMA 5-15P	IEC-320 C20
Autonomia media tipica (300 W)	90 minuti	51 minuti	90 minuti
Autonomia media tipica (600 W)	40 minuti	17 minuti	40 minuti

Per acquistare un gruppo di continuità equivalente conforme alle normative locali nei paesi al di fuori delle aree geografiche indicate, rivolgersi a un fornitore terzo come Interpower Corporation ([www.interpower.com](http://www.interpower.com)).

## Vincoli ambientali

Elemento	Specifica
Temperatura	Trasporto e conservazione: da -10 °C a 50 °C. Condizioni di funzionamento: mantenere nel laboratorio una temperatura compresa tra 19 °C e 25 °C (22 °C ± 3 °C). Questa è la temperatura operativa dello strumento. Durante una corsa, evitare che la temperatura ambiente subisca sbalzi superiori a ±2 °C.
Umidità	Trasporto e conservazione: umidità senza condensa tra 15-80%. Condizioni di funzionamento: mantenere un'umidità relativa, senza condensa, nell'intervallo 20-80%.
Elevazione	Installare lo strumento a un'altitudine inferiore a 2.000 metri.
Qualità dell'aria	Utilizzare lo strumento in un ambiente con Grado di inquinamento 2 o migliore. La definizione ambiente con "Grado di inquinamento 2" si applica a un ambiente che presenta solo sostanze inquinanti non conduttive.
Ventilazione	Rivolgersi al dipartimento preposto per i requisiti di ventilazione in base alle specifiche di dissipazione termica dello strumento.

## Dissipazione termica

Potenza misurata	Calore emesso
600 Watt	2.048 BTU/ora

## Emissioni acustiche

Emissioni acustiche (dB)	Distanza dallo strumento
< 70 dB	1 m

Un valore misurato < 70 dB rientra nel livello di una normale conversazione a una distanza di circa 1 metro.

## Considerazioni relative alla rete informatica

Lo strumento NextSeq 550Dx è designato all'uso con una rete.



L'esecuzione di una corsa in modalità indipendente richiede una connessione di rete per trasferire i dati della corsa a una posizione di rete. Per eseguire lo strumento in modalità indipendente, lo strumento deve essere in modalità di ricerca. Non salvare i dati della corsa sul disco rigido locale sullo strumento NextSeq 550Dx. Il disco rigido deve essere utilizzato per l'archiviazione temporanea prima del trasferimento automatico dei dati. Qualsiasi dato salvato sul disco rigido oltre la corsa attuale riempie il disco rigido e impedisce l'esecuzione delle corse successive fino a quando viene liberato spazio.

Una connessione Internet è richiesta per eseguire quanto segue:

- ▶ Installare gli aggiornamenti su NextSeq 550Dx Operating Software (NOS) dall'interfaccia dello strumento.
- ▶ [Facoltativo] Scaricare i dati delle prestazioni dello strumento.
- ▶ [Facoltativo] Assistenza a distanza dall'Assistenza Tecnica Illumina.

## Connessioni di rete

Seguire le raccomandazioni qui elencate per l'installazione e la configurazione di una connessione di rete:

- ▶ Usare una connessione da 1 GB tra lo strumento e il sistema di gestione dati. Questa connessione può essere diretta o realizzata mediante uno switch di rete.
- ▶ L'ampiezza di banda richiesta per una connessione è:
  - ▶ 50 Mb/s per strumento per i caricamenti interni sulla rete.
  - ▶ [Facoltativo] 5 Mb/s per strumento per i caricamenti dei dati delle prestazioni.
- ▶ Gli switch devono essere gestiti.
- ▶ La strumentazione di rete, come gli switch, devono disporre di almeno 1 GB/s.
- ▶ Calcolare la capacità totale del carico di lavoro su ciascun switch di rete. Il numero di strumenti collegati e la strumentazione ausiliare, come una stampante, possono incidere sulla capacità.

Seguire le raccomandazioni qui elencate per l'installazione e la configurazione di una connessione di rete:

- ▶ Se possibile, isolare il traffico del sequenziamento da altro traffico sulla rete.
- ▶ I cavi devono essere di categoria 5e o migliore. Un cavo di rete schermato di categoria 5e di tre metri è fornito con lo strumento per le connessioni di rete.
- ▶ Configurare gli aggiornamenti di Windows per impedire gli aggiornamenti automatici.

## Assistenza Tecnica per la rete

Illumina non installa o fornisce assistenza tecnica per le connessioni in rete.

Rivedere le attività di manutenzione della rete per eventuali rischi di compatibilità con lo strumento Illumina, inclusi i rischi seguenti:

- ▶ **Rimozione di Group Policy Objects (GPOs):** i GPO possono incidere sul sistema operativo (Operating System, OS) delle risorse Illumina collegate. I cambiamenti apportati al sistema operativo possono interferire sul software proprietario eseguito nei sistemi Illumina. Gli strumenti Illumina sono stati testati e verificati per funzionare correttamente. Dopo aver eseguito i collegamenti GPO del dominio, alcune impostazioni potrebbero incidere sul software dello strumento. Se il software dello strumento non funziona correttamente, consultare l'amministratore IT della propria sede per le possibili interferenze causate dai GPO.
- ▶ **Attivazione di Windows Firewall e di Windows Defender:** questi prodotti Windows possono incidere sulle risorse del sistema operativo utilizzate dal software Illumina. Installare un software antivirus per proteggere il computer di controllo dello strumento.

- **Modifiche ai privilegi degli utenti preconfigurati:** mantenere i privilegi esistenti per gli utenti preconfigurati. Se necessario, gli utenti preconfigurati possono essere resi non disponibili.

## Collegamenti interni

Collegamento	Valore	Scopo
Dominio	localhost:*	Tutte le porte per la comunicazione da localhost a localhost, che sono necessarie per la comunicazione tra i processi.
Indirizzo IP	192.168.113.*:*	Consente tutte le porte. Collega la comunicazione con il firmware sulla scheda di rete. Se si utilizza un server proxy, devono essere riservati i seguenti indirizzi IP: 192.168.113.5 e 192.168.113.2. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'Assistenza Tecnica Illumina.
Porta	8081	Software per l'analisi primaria
	8080	NextSeq 550Dx Operating Software (NOS)
	8090	Rich Communication Services (RCS)

## Collegamenti esterni

Collegamento	Valore	Scopo
Dominio	s3-external-1.amazonaws.com s3.amazonaws.com *.basespace.illumina.com	Stato di integrità dello strumento

## Configurazioni del sistema operativo

Prima della spedizione, gli strumenti Illumina sono testati e verificati per funzionare entro determinate specifiche. Dopo l'installazione, le modifiche alle impostazioni possono creare rischi per le prestazioni o per la sicurezza.

Le seguenti raccomandazioni di configurazione mitigano i rischi relativi alle prestazioni e alla sicurezza del sistema operativo:

- Configurare una password che sia di almeno 10 caratteri e utilizzare le regole relative all'ID per ottenere ulteriori informazioni. **Conservare la password.**
  - Illumina non conserva le credenziali di login dei clienti e le password sconosciute non possono essere reimpostate.
  - Una password sconosciuta richiede che un rappresentante Illumina ripristini il default di fabbrica, che rimuove tutti i dati dal sistema ed estende il tempo di supporto necessario.
- Configurare gli aggiornamenti automatici di Windows solo per applicare gli aggiornamenti critici per la sicurezza.
- Quando si collega un dominio con gli oggetti criteri di gruppo (Group Policy Object, GPO), alcune impostazioni potrebbero incidere sul sistema operativo o sul software dello strumento. Se il software dello strumento non funziona correttamente, consultare l'amministratore IT della propria sede per le possibili interferenze causate dai GPO.
- Utilizzare il firewall di Windows o un firewall di rete (hardware o software) e disattivare il protocollo desktop remoto (Remote Desktop Protocol, RDP). Per maggiori informazioni sui firewall e i protocolli RDP, vedere *Guida alle pratiche migliori per la sicurezza Illumina (Pubb. n. 970-2016-016)*.

- ▶ Mantenere i privilegi amministrativi per gli utenti. Il software dello strumento Illumina è configurato per consentire i permessi dell'utente quando lo strumento viene spedito.
- ▶ Il sistema dispone di indirizzi IP interni fissi, che possono causare un mancato funzionamento del sistema quando si verificano conflitti.
- ▶ Il computer di controllo è progettato per funzionare con i sistemi di sequenziamento Illumina. La navigazione sul Web, il controllo delle e-mail, la revisione dei documenti e altre attività non legate al sequenziamento creano problemi di qualità e di sicurezza.

## Mappatura delle unità

Non condividere alcuna unità o cartella dallo strumento.

Mappare i drive su Samba/Common Internet File System (CIFS) su altri dispositivi.

Nel software operativo, utilizzare il percorso completo UNC per gli output della corsa.

## Aggiornamenti di Windows

Per proteggere i propri dati, si raccomanda di eseguire regolarmente tutti gli aggiornamenti critici per la sicurezza di Windows. Durante gli aggiornamenti, lo strumento deve essere inattivo, in quanto molti di essi richiedono il rinvio del sistema. Gli aggiornamenti generali possono mettere a rischio l'ambiente del sistema operativo e non sono supportati.

Se non è possibile effettuare gli aggiornamenti per la sicurezza, le alternative all'attivazione degli aggiornamenti di Windows sono:

- ▶ Utilizzare un firewall più potente e isolare la rete (LAN virtuale).
- ▶ Isolare la rete dell'archiviazione collegata alla rete (Network Attached Storage, NAS), che consente sempre la sincronizzazione dei dati sulla rete.
- ▶ Archiviare su un dispositivo USB locale.
- ▶ Utilizzare il comportamento e la gestione degli utenti per impedire l'uso improprio del computer di controllo e assicurare i controlli appropriati basati sui permessi.

Per maggiori informazioni sulle alternative di Windows Update, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.

## Software di terze parti

Illumina non supporta software che non siano stati forniti al momento dell'installazione. Non installare Chrome, Java, Box o qualsiasi altro software di terze parti che non sia stato fornito con il sistema.

I software di terze parti non sono stati testati e possono interferire con le prestazioni e la sicurezza. Ad esempio, RoboCopy o altri programmi di sincronizzazione e streaming possono fornire dati di sequenziamento corrotti o mancanti in quanto interferiscono con lo streaming eseguito con il gruppo di software di controllo.

## Comportamento dell'utente

Il computer di controllo dello strumento è progettato per funzionare con i sistemi di sequenziamento Illumina. Non considerarlo come un computer per uso generico. Per motivi di sicurezza e per la qualità, non utilizzare il computer di controllo per navigare in Internet, controllare le e-mail, rivedere documenti o per altre attività non necessarie, in quanto tali attività possono causare una riduzione delle prestazioni e la perdita di dati.

## Software antivirus

Si raccomanda vivamente di utilizzare un software antivirus a scelta per proteggere il computer di controllo dello strumento.

Al fine di evitare perdita di dati o interruzioni, configurare il software antivirus come segue:

- ▶ Impostare le scansioni manuali. Non abilitare le scansioni automatiche.
- ▶ Eseguire le scansioni manuali solo quando lo strumento non è in uso.
- ▶ Impostare gli aggiornamenti affinché vengano scaricati ma non installati senza l'autorizzazione dell'utente.
- ▶ Non eseguire l'aggiornamento durante il funzionamento dello strumento. Eseguire l'aggiornamento solo quando lo strumento non è in funzione e quando è sicuro eseguire il riavvio del computer dello strumento.
- ▶ Non riavviare automaticamente il computer dopo l'aggiornamento.
- ▶ Escludere la directory dell'applicazione e l'unità contenente i dati dalla protezione del file system in tempo reale, nello specifico la directory C:\Illumina e l'unità D:\.

## Apparecchiature e materiali di consumo forniti dall'utente

Le apparecchiature e i materiali di consumo seguenti sono utilizzati sullo strumento NextSeq 550Dx. Per maggiori informazioni, vedere la *Guida di consultazione dello strumento NextSeq 550Dx (documento n. 1000000009513)*.

### Materiali di consumo forniti dall'utente per le corse di sequenziamento

Materiale di consumo	Fornitore	Scopo
Salviettine imbevute di alcol isopropilico al 70% oppure etanolo al 70%	VWR, n. di catalogo 95041-714 (o equivalente) Fornitore di laboratorio generico	Pulizia della cella a flusso e per uso generico
Panno da laboratorio a bassissimo rilascio di particelle	VWR, n. di catalogo 21905-026 (o equivalente)	Pulizia della cella a flusso e per uso generico

### Materiali di consumo forniti dall'utente per la manutenzione dello strumento

Materiale di consumo	Fornitore	Scopo
NaOCl, 5% (ipoclorito di sodio)	Sigma-Aldrich, n. di catalogo 239305 (o equivalente da laboratorio)	Lavaggio dello strumento utilizzando un lavaggio post-corsa manuale; diluito allo 0,12%
Tween 20	Sigma-Aldrich, n. di catalogo P7949	Lavaggio dello strumento utilizzando le opzioni di lavaggio manuale, diluito allo 0,05%
Acqua da laboratorio	Fornitore di laboratorio generico	Lavaggio dello strumento (lavaggio manuale)
Filtro dell'aria	Illumina, n. di catalogo 20022240	Pulizia dell'aria aspirata dallo strumento per il raffreddamento

## Linee guida per l'acqua da laboratorio

Per eseguire le procedure dello strumento utilizzare sempre acqua da laboratorio o acqua deionizzata. Non usare mai acqua di rubinetto. Utilizzare solo acqua da laboratorio o gli equivalenti seguenti:

- ▶ Acqua deionizzata
- ▶ PW1 Illumina
- ▶ Acqua con resistività pari a 18 Megaohm (MΩ)
- ▶ Acqua Milli-Q
- ▶ Acqua Super-Q
- ▶ Acqua sterile per biologia molecolare

## Apparecchiature fornite dall'utente

Apparecchio	Fornitore
Congelatore, temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C, antibrina	Fornitore di laboratorio generico
Frigorifero, temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C	Fornitore di laboratorio generico

## Cronologia revisioni

Documento	Data	Descrizione della modifica
Documento n. 1000000009869 v03	Marzo 2019	Corretta la formattazione per il requisito di larghezza di banda richiesto per la velocità.
Documento n. 1000000009869 v02	Gennaio 2019	Aggiunte informazioni sulle cartucce della cella a flusso NextSeq 550Dx High Output v2.5 (300 cicli). Aggiornate le istruzioni di installazione per indicare che è richiesto l'accesso alle porte USB. Corrette le specifiche UPS per il Giappone.
Documento n. 1000000009869 v01	Agosto 2018	Marchi normativi aggiornati.
Documento n. 1000000009869 v00	Novembre 2017	Versione iniziale.

## Assistenza Tecnica

Per l'assistenza tecnica, contattare l'Assistenza Tecnica Illumina.

Sito Web: [www.illumina.com](http://www.illumina.com)  
E-mail: [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

Numeri di telefono dell'Assistenza clienti Illumina


Area geografica	Gratuito	Regionale
Nord America	+1.800.809.4566	
Australia	+1.800.775.688	
Austria	+43 800006249	+43 19286540
Belgio	+32 80077160	+32 34002973
Cina	400.066.5835	
Danimarca	+45 80820183	+45 89871156
Finlandia	+358 800918363	+358 974790110
Francia	+33 805102193	+33 170770446
Germania	+49 8001014940	+49 8938035677
Giappone	0800.111.5011	
Hong Kong	800960230	
Irlanda	+353 1800936608	+353 016950506
Italia	+39 800985513	+39 236003759
Paesi Bassi	+31 8000222493	+31 207132960
Norvegia	+47 800 16836	+47 21939693
Nuova Zelanda	0800.451.650	
Regno Unito	+44 8000126019	+44 2073057197
Singapore	+1.800.579.2745	
Spagna	+34 911899417	+34 800300143
Svezia	+46 850619671	+46 200883979
Svizzera	+41 565800000	+41 800200442
Taiwan	00806651752	
Altri paesi	+44.1799.534000	

**Schede dei dati di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS):** sono disponibili sul sito Web Illumina all'indirizzo [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).

**Documentazione dei prodotti:** la documentazione dei prodotti in formato PDF può essere scaricata dal sito Web Illumina. Andare alla pagina [support.illumina.com](http://support.illumina.com), selezionare un prodotto, quindi fare clic su **Documentation & Literature** (Documentazione e letteratura).



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122  
U.S.A.  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (fuori dal Nord  
America)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com

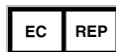

Illumina Cambridge Limited  
Chesterford Research Park, Little Chesterford  
Saffron Walden, CB10 1XL  
REGNO UNITO

**Sponsor Australiano**  
Illumina Australia Pty Ltd  
1 International Court  
Scoresby, Victoria, 3179  
Australia

**PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO**

© 2019 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati.

**illumina®**