

Instrument MiSeqDx

Referentni priručnik za MOS v4

Ovaj dokument i njegov sadržaj vlasništvo su tvrtke Illumina, Inc. i njezinih povezanih društava („Illumina“) te su namijenjeni isključivo za ugovornu upotrebu klijentima u vezi s proizvodom(ima) opisanim(a) u njemu(ima). Dokument i njegov sadržaj ne smiju se upotrebljavati ni distribuirati ni u koju drugu svrhu niti se smiju na neki drugi način prenositi, otkrivati ili reproducirati bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Illumina. Illumina ovim dokumentom ne prenosi nikakve licencije zaštićene svojim pravom na patent, žig, autorskim pravom ili običajnim pravom ni slična prava bilo koje treće strane.

Softver vam se licencira prema uvjetima i odredbama Licencnog ugovora za softver za sekvenciranje društva Illumina u zasebnom dokumentu. Ako ne prihvaćate te uvjete i odredbe, Illumina vam ne može licencirati softver te ga ne smijete upotrebljavati ni instalirati.

Kvalificirano osoblje s odgovarajućom izobrazbom mora se strogo i bez iznimki pridržavati uputa u ovom dokumentu da bi se zajamčila pravilna i sigurna upotreba proizvoda opisanih u njemu. Prije upotrebe proizvoda nužno je s razumijevanjem pročitati cjelokupan sadržaj dokumenta.

AKO UPUTE U DOKUMENTU NE PROČITATE U CIJELOSTI TE IH SE NE PRIDRŽAVATE BEZ IZNIMKI, MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA PROIZVODA, OZLJEDA KORISNIKA ILI DRUGIH OSOBA TE DO OŠTEĆENJA DRUGE IMOVINE.

ILLUMINA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA ŠTETE NASTALE USLIJED NEPRAVILNE UPOTREBE PROIZVODA KOJI SU OPISANI U OVOM DOKUMENTU (UKLJUČUJUĆI DIJELOVE TIH PROIZVODA I SOFTVER) NI ZA BILO KOJU UPOTREBU PROIZVODA KOJA NIJE U OPSEGU IZRIČITO ZAPISANIH LICENCIJA ILI DOPUŠTENJA DOBIVENIH OD DRUŠTVA ILLUMINA U VEZI S KUPČEVOM KUPNJOM PROIZVODA.

© 2026. Illumina, Inc. Sva prava pridržana.

Svi su žigovi vlasništvo tvrtke Illumina, Inc. ili njezinih vlasnika. Konkretna informacija o žigovima potražite na adresi www.illumina.com/company/legal.html.

Softver sadrži biblioteku SeqAn, za koju Illumina ima licenciju te je distribuira pod sljedećom licencijom:

Autorsko pravo © 2010., Knut Reinert, FU Berlin, sva prava pridržana. Daljnja distribucija i upotreba u izvorišnom i binarnom obliku uz preinake i bez njih dopuštene su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Daljnje distribucije izvornog koda moraju sadržavati prethodno navedenu obavijest o autorskom pravu, popis uvjeta te sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.

U dokumentaciju i/ili druge materijale koji se isporučuju uz daljnu distribuciju u binarnom obliku moraju se dodati navedena obavijest o autorskom pravu, popis uvjeta te sljedeća izjava o odricanju odgovornosti.

Tvrtka FU Berlin i ime Knut Reinert te imena suradnika ne smiju se upotrebljavati za promidžbu proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne konkretne pisane dozvole.

VLASNICI AUTORSKOG PRAVA I SURADNICI OVAJ SOFTVER NUDE U ZATEČENOM STANJU I BEZ BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, PRI ČEMU SE, MEĐU OSTALIMA, ODRIČU PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. VLASNIK AUTORSKOG PRAVA I SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIMA, NABAVU ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPOTREBE PODATAKA ILI DOBITI ODNOSNO PREKID U RADU) BEZ OBZIRA NA RAZLOG NJEZINA NASTANKA TE AKO JE PREMA BILO KAKVOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, PREMA STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI KAZNENOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR I DRUGO) NA BILO KOJI NAČIN NASTALA USLIJED UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU POSTOJALA SAZNANJA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Povijest revizija

Br. dokumenta	Datum	Opis promjene
Br. dokumenta 200010452 v02	lipanj 2026.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodana je referenca za MiSeq Reporter za dodatne analize kao dio softvera koji podržava MiSeqDx. • Dodana je hiperpoveznica na internetsku stranicu za podršku instrumenta MiSeqDx. • Ažurirana je temperatura skladištenja. • Uklonjene su informacije o antivirusnom softveru. • Ažurirana je poveznica na pravila ograničenja softvera na portalu za sigurnost proizvoda tvrtke Illumina.
Br. dokumenta 200010452 v01	listopad 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Ažurirane reference za Postavljanje lokalnog pokretanja. • Ažuriran je odjeljak usluge praćenja proaktivnog rada tvrtke Illumina kako bi uključio funkciju Pošaljite stanje instrumenta radi održavanja i rješavanja problema. • Ažuriran je postupak pranja voda predloška. • Dodana je napomena postavkama e-pošte koje definiraju parametre neuspješnog očitavanja RFID-a.
Br. dokumenta 200010452 v00	studen 2021.	Početno izdanje za podršku za MOS v4.0 i Local Run Manager v3.0.

Sadržaj


Povijest revizija	iii
Pregled	1
Komponente	1
Softver MiSeqDx	3
Softver Local Run Manager	5
Potreban prostor na disku	5
Software Restriction Policies	6
Način rada za sekvenciranje	6
Početak rada	8
Pokrenite MiSeqDx	8
Postavljanje mogućnosti ispiranja nakon obrade	8
Postavljanje mogućnosti automatskog pokretanja obrade	9
Uključivanje proaktivne podrške tvrtke Illumina	9
Postavljanje preferencija za e-poštu	10
Postavljanje zadane lokacije izlazne mape	11
Obavezan potrošni materijal	11
Skladištenje i rukovanje	12
Sekvenciranje	13
Uvod	13
Trajanje obrade	13
Generiranje klastera	13
Sekvenciranje	13
Analiza	13
Priprema uloška reagensa	14
Prijava i praćenje uputa za sekvenciranje	15
Čišćenje protočnog članka	16
Umetanje protočnog članka	17
Umetanje reagensa	19
Nadzor obrade	22
Provođenje ispiranja nakon obrade	24
Održavanje	29
Učestalost održavanja	29
Preventivno održavanje	29

Provođenje ispiranja radi održavanja	29
Provođenje ispiranja u stanju mirovanja	32
Isključivanje instrumenta	35
Otklanjanje poteškoća	36
Uvod	36
Grupiranje zapisnika radi otklanjanja poteškoća	36
Provođenje provjere sustava	37
Pauziranje ili zaustavljanje obrade	37
Ručno podizanje dozatora s uloška reagensa	38
Otklanjanje pogrešaka u postavljanju obrade	39
Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a	40
Sprječavanje ponovnog pokretanja tijekom obrade	41
Otklanjanje poteškoća zbog pogreške brzine protoka	41
Testiranje volumena	42
Rješavanje pogrešaka s temperaturom hladnjaka reagensa	43
Rješavanje pogrešaka analize Local Run Manager	43
Konfiguracija postavki sustava	43
Izlazne mape	46
Mape obrade	46
Tehnička pomoć	47

Pregled

Komponente


MiSeqDx se sastoji od sljedećih vanjskih komponenti:

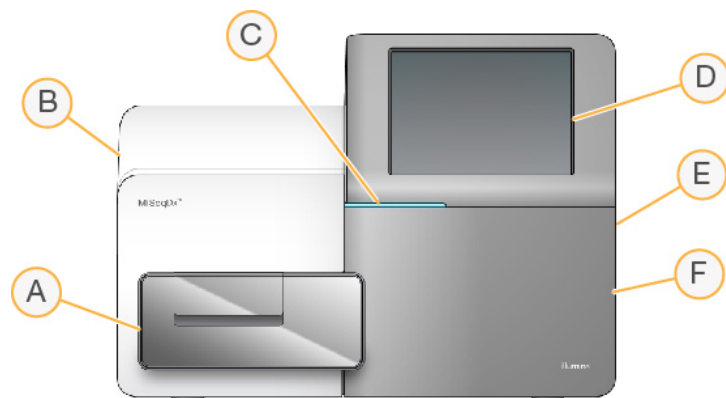

- A. **Odjeljak za protočni članak** – sadrži nosač protočnog članka na kojem se tijekom cijele obrade nalazi protočni članak. Motori nosača protočnog članka pomiču nosač iz zatvorenog optičkog modula radi umetanja protočnog članka te vraćaju nosač kad započne obrada.
- B. **Zatvoreni optički modul** – sadrži optičke komponente koje omogućuju snimanje protočnog članka.
- C. **Statusna traka** – označava status protočnog članka kao spreman za sekvenciranje (zeleni), u obradi (plavi) ili traži pozornost korisnika (narančasti).
- D. **Monitor s dodirnim zaslonom** – prikazuje sučelje upravljačkog softvera za konfiguraciju sustava i postavljanje obrade.
- E. **Vanjski USB priključak** – omogućuje prijenos datoteka i podataka na računalo instrumenta s monitora s dodirnim zaslonom.
- F. **Odjeljak za reagense** – sadrži reagense na odgovarajućim temperaturama, otopine za ispiranje i bocu za iskorištene reagense. Vratašca odjeljka za reagense zatvaraju se putem magnetske brave.

Sučelje instrumenta MiSeqDx vodi vas kroz korake za postavljanje obrade putem monitora s dodirnim zaslonom. Za umetanje komponenti za obradu potreban je pristup odjeljku za reagense i odjeljku za protočni članak.

Odjeljak za protočni članak

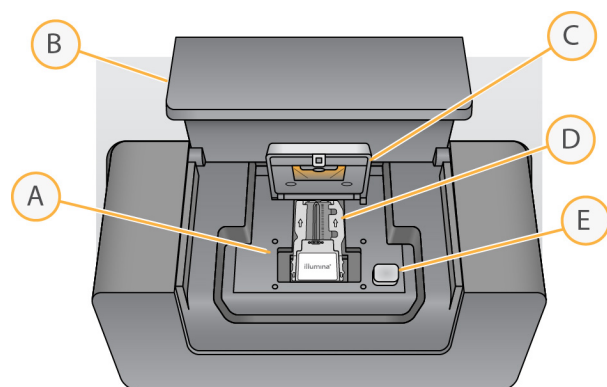


- A. Nosač za protočni članak
- B. Vratašca odjeljka za protočni članak
- C. Zasun protočnog članka
- D. Protočni članak
- E. Gumb za otvaranje zasuna protočnog članka

U odjeljku za protočni članak nalaze se nosač protočnog članka, toplinska stanica te priključci za povezivanje sustava fluida s protočnim člankom. Na nosaču protočnog članka nalazi se protočni članak, a zasun protočnog članka drži protočni članak na mjestu. Kad se zatvori zasun protočnog članka, dvije iglice u blizini šarke zasuna automatski namještaju protočni članak.

Toplinska stanica, koja se nalazi ispod nosača protočnog članka, kontrolira promjene temperature protočnog članka koje su potrebne za generiranje klastera i sekvenciranje.

Protočni članak

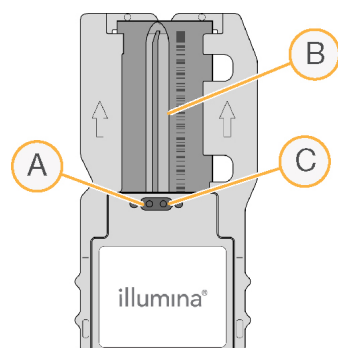


- A. Izlazni priključak
- B. Područje snimanja
- C. Ulazni priključak

Protočni članak MiSeqDx stakleni je supstrat za jednokratnu upotrebu na kojem se generiraju klasteri i izvodi reakcija sekvenciranja.

Reagensi kroz ulazni priključak ulaze u protočni članak, prolaze kroz jednokanalno područje snimanja, a potom izlaze iz protočnog članka kroz izlazni priključak. Otpad koji izlazi iz protočnog članka provodi se do boce za otpad.

Tijekom obrade sekvenciranjem snimaju se slike jednog kanala na malim područjima snimanja koja se nazivaju pločice.

Odjeljak za reagense

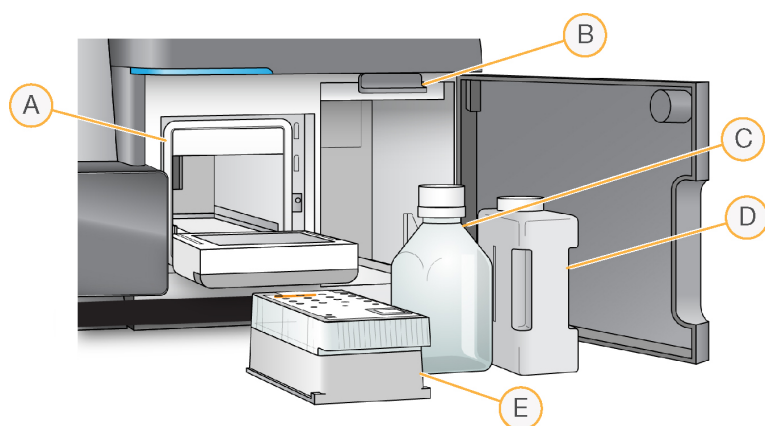

- A. Hladnjak reagensa
- B. Ručka dozatora (prikazana u podignutom položaju)
- C. Boca Otopina SBS MiSeqDx (PR2)
- D. Boca za otpad
- E. Uložak reagensa

U odjeljku za reagense nalaze se hladnjak reagensa te položaji za bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) te bocu za otpad.

Tijekom obrade u hladnjaku reagensa nalazi se jednokratni uložak reagensa. Tijekom ispiranja instrumenta u hladnjaku reagensa nalazi se plitica za ispiranje. Softver automatski spušta dozatore u svaki spremnik uložka reagensa u određeno vrijeme tijekom obrade, ovisno o postupku koji se provodi.

Desno od hladnjaka reagensa nalaze se dva oblikovana utora, jedan za bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) i jedan za bocu za otpad. Ručkom dozatora boce se blokiraju na mjestu te se u svaku bocu spušta odgovarajući dozator.

Reagensi se pumpaju kroz dozatore i vodove za fluide, a potom na protočni članak. Tijekom cijelog postupka otpadni reagens provodi se u bocu za otpad.

Softver MiSeqDx

Softverski paket instrumenta obuhvaća integrirane aplikacije koje obavljaju obrade sekvenciranjem, analizu na instrumentu i druge povezane funkcije.

- **Operacijski softver MiSeq (MOS)** – kontrolira rad instrumenta. Sučelje softvera Operacijski softver MiSeq (MOS) vodi vas kroz korake umetanja protočnog članka i reagensa prije početka obrade. Tijekom postupka obrade prikazuje se pregled statistike kvalitete. Taj je softver unaprijed instaliran na instrument i izvodi se na njemu.
- MOS tijekom obrade pomiče nosač protočnog članka, dozira reagense, kontrolira temperature protočnog članka te na protočnom članku snima slike klastera. MOS obavlja obradu u skladu s parametrima navedenima u softveru Local Run Manager.
- **Softver Real-Time Analysis (RTA)** – analizira slike i određuje očitane baze te svakoj bazi za svaki ciklus dodjeljuje ocjenu kvalitete. Slike se privremeno pohranjuju u mapu obrade da bi ih RTA mogao obraditi, a potom se, nakon što RTA dovrši analizu, automatski brišu.
- **Softver Local Run Manager** – rješenje integrirano na instrumentu koje se upotrebljava za stvaranje obrade, nadzor statusa, analizu podataka dobivenih sekvenciranjem i pregled rezultata. Local Run Manager također prati informacije o uzorcima i kontrolira korisnička dopuštenja. Softver se pokreće na računalu instrumenta, a prikazuje putem mrežnog preglednika. Pogledajte [Softver Local Run Manager na stranici 5](#).
- Za obrade RUO **MiSeq Reporter** dostupan je za izvođenje dodatnih analiza.

Ikone statusa

Kad se instrument inicijalizira ili pokrene, ikona statusa na sučelju upravljačkog softvera pokazuje promjenu stanja. Broj na ikoni označava broj uvjeta za status.

Kada se promijeni status izvođenja, ikona treperi da bi vas upozorila na to. Odaberite ikonu da bi se prikazao opis stanja. Odaberite **Acknowledge** (Prihvati) da biste izbrisali poruku, a zatim **Close** (Zatvori) da biste zatvorili dijaloški okvir.

Vrste poruka koje se prikazuju u prozoru statusa filtrirajte tako da odaberete ikone pri vrhu prozora. Odabirom ikone uključuje se odnosno skriva prikaz određenog stanja.

Ikona statusa	Naziv statusa	Opis
	Status u redu	Nema promjene. Sustav radi normalno.
	Upozorenje	Upozorenja ne zaustavljaju obradu. Međutim, na neka je upozorenja potrebno reagirati da bi se mogla nastaviti obrada.
	Pogreška	Pogreške najčešće zaustavljaju obradu te je uglavnom potrebno nešto poduzeti da bi se obrada mogla nastaviti.

Indikatori senzora

Tri indikatora senzora pri dnu svakog zaslona sučelja prikazuju status komponenti instrumenta.

Slika 1 Indikatori senzora



Indikatori senzora slijeva udesno predstavljaju sljedeće komponente:

- temperatura hladnjaka reagensa u °C
- temperatura protočnog članka u °C

Softver Local Run Manager

Softver Local Run Manager integrirano je rješenje na instrumentu za bilježenje uzoraka za obradu, određivanje parametara obrade, nadzor statusa, analiziranje podataka dobivenih sekvenciranjem i prikaz rezultata.

Pored toga, Local Run Manager kontrolira provjeru autentičnosti korisnika, čime korisnicima dodjeljuje dozvole različitih razina pristupa. Dozvole se spremaju u datoteku baze podataka, na koju upućuje MiSeqDx. Local Run Manager također može nadzirati obradu sekvenciranjem. Za više informacija pogledajte *Referentni priručnik za softver Local Run Manager v4 za MiSeqDx (broj dokumenta 200046657)*.

Sekvenciranje tijekom analize

Računalni resursi instrumenta MiSeqDx upotrebljavaju se ili za sekvenciranje ili za analizu.

Uz Local Run Manager, ako se na instrumentu MiSeqDx nova obrada sekvenciranjem pokrene prije dovršetka sekundarne analize prethodne obrade, prikazuje se dijaloški okvir za potvrdu. Nakon što potvrdite da želite pokretanje nove obrade sekvenciranja, sekundarna će se analiza ranije obrade zaustaviti sve dok se ne dovrši sekvenciranje nove obrade.

Kada novi postupak završi sekvenciranje, sekundarna analiza prethodnog postupka automatski započinje ispočetka.

Potreban prostor na disku

Kapacitet prostora za pohranu računala integriranog u instrument iznosi oko 650 GB.

Softver prije pokretanja obrade provjerava dostupan prostor na disku. Ako na disku nema dovoljno prostora za obradu, prikazuje se upit softvera. U poruci se prikazuje koliko je prostora na disku potrebno za obradu te koliko je prostora potrebno osloboditi na disku da bi se obrada mogla nastaviti.

Ako se prikaže upit za oslobađanje prostora na disku, premjestite ili izbrišite starije mape obrada, ovisno o tome što je primjereno.

Software Restriction Policies

Software Restriction Policies (SRP) u sustavu Windows primjenjuje pravila koja dopuštaju samo pokretanje određenog softvera. Za MiSeqDx, SRP pravila temelje se na certifikatima, nazivima datoteka, nastavcima datoteka i direktorijima.

SRP je uključen prema zadanim postavkama da bi se spriječilo pokretanje neželjenog softvera na upravljačkom računalu. Samo korisnik koji je sbsadmin može isključiti SRP.

IT predstavnik ili administrator sustava može prilagoditi razinu sigurnosti dodavanjem i uklanjanjem pravila. Ako je sustav dodan u domenu, lokalni GPO (Group Policy Object) mogao bi automatski izmijeniti pravila i isključiti SRP.

Informacije o konfiguraciji SRP-a potražite na [Portal za sigurnost proizvoda tvrtke Illumina](#).



OPREZ

Isključivanjem SRP-a onemogućuje se zaštita koju ta značajka pruža. Promjenom pravila nadjačavaju se zadane zaštite.

Način rada za sekvenciranje

Kad pokrenete instrument, prikazuje se zaslon sustava Windows **Choose an operating system** (Odaberite operacijski sustav). Na zaslonu možete odabrati način rada operacijskog sustava za sekvenciranje koji možete pokrenuti – Research (Istraživanje, RUO) ili Diagnostic (Dijagnostika, Dx). Ako pričekate 10 sekundi, automatski se odabire zadani način rada. Zadani način rada i vrijeme do pokretanja zadanog načina rada možete u bilo kojem trenutku promijeniti.

- Kad odaberete način rada, morate ponovno pokrenuti sustav da biste ga promijenili. Pogledajte [Ponovno pokretanje softvera sustava na stranici 7](#).
- Kad prijeđete iz načina rada RUO u Dx ili obrnuto, od vas se traži da pokrenete ispiranje nakon obrade. Stanje ispiranja ne zadržava se prelaskom iz jednog načina rada u drugi.

Da biste mogli aktivirati značajku ponovnog pokretanja, potrebna je administratorska razina pristupa sustavu Windows ili dozvola za istraživački način rada za običnog korisnika.



OPREZ

Mogućnost Restore Factory OS (RUO/Dx) (Vraćanje tvorničkog operacijskog sustava (RUO/Dx)) namijenjena je samo terenskim serviserima tvrtke Illumina. Tom se mogućnošću trajno brišu svi podaci s pogona C te se operacijski sustav vraća u izvorno stanje. Ako se odabere ta mogućnost, terenski servisni inženjer tvrtke Illumina mora vratiti funkcionalnost sustava. Postupak vraćanja nakon pokretanja ne može se otkazati. Tu mogućnost odaberite samo ako vam to preporuči terenski serviser tvrtke Illumina.

Da biste promijenili zadani način pokretanja, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Change defaults or choose other options** (Promjena zadanih postavki ili odabir drugih mogućnosti).
2. Na zaslonu Options (Mogućnosti) odaberite **Choose a default operating system** (Odaberite zadani operacijski sustav).
3. Odaberite željenu mogućnost pokretanja.
4. Odaberite strelicu za povratak da biste se vratili na zaslon **Options** (Mogućnosti).

Da biste promijenili vrijeme do pokretanja zadanog načina rada, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Change defaults or choose other options** (Promjena zadanih postavki ili odabir drugih mogućnosti).
2. Na zaslonu Options (Mogućnosti) odaberite **Change the timer** (Promjena mjerača vremena).
3. Na zaslonu Change the timer (Promjena mjerača vremena) odaberite željeno vrijeme.
4. Odaberite strelicu za povratak da biste se vratili na zaslon **Options** (Mogućnosti).



UPOZORENJE

U sustavu Windows 10, nakon pokretanja u sustav se može prijaviti samo onaj korisnik koji ga je ponovno pokrenuo.

Ponovno pokretanje softvera sustava

Odaberite naredbu Reboot (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli softver sustava. Softver nije potrebno ponovno pokretati tijekom redovnog održavanja.

- U glavnom izborniku odaberite **Reboot** (Ponovno pokreni sustav).


Početak rada

Pokrenite MiSeqDx

1. Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje na poleđini instrumenta u položaj ON (uključeno).

NAPOMENA Kako bi imao najbolje radne značajke, instrument nemojte isključivati. Međutim, ako morate isključiti instrument, pogledajte odjeljak [Isključivanje instrumenta na stranici 35](#). Pričekajte *najmanje* 60 sekundi prije nego što prekidač napajanja vratite u položaj ON (Uključeno).

Slika 2 Položaj prekidača za napajanje

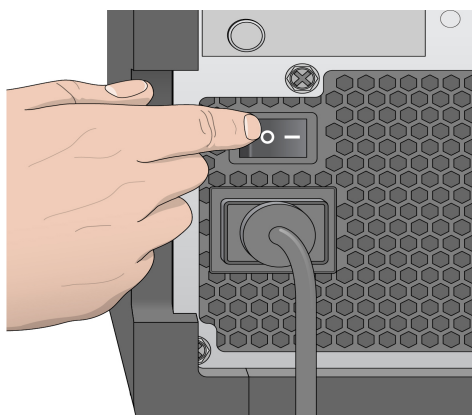

2. Pričekajte da se sustav učita, a zatim odaberite operacijski sustav i prijavite se u njega. Po potrebi zatražite korisničko ime i lozinku od administratora ustanove.
Dodatne informacije o mogućnostima operacijskog sustava i načina rada za sekvenciranje pogledajte u odjeljku [Način rada za sekvenciranje na stranici 6](#)
Kad se operacijski sustav učita, pokrenut će se Operacijski softver MiSeq (MOS) te automatski inicijalizirati sustav. Imajte na umu da se MiSeq Control Software (MCS) pokreće automatski kad je odabran način rada RUO.
3. Za Local Run Manager, ako je omogućeno upravljanje korisnicima, prijavite se s pomoću korisničkog imena i lozinke za Local Run Manager te odaberite **Next** (Dalje).

Postavljanje mogućnosti ispiranja nakon obrade

Nakon svake obrade obavezno je isprati instrument. Softver neće dopustiti postavljanje sljedeće obrade dok se ne obavi ispiranje. Mogućnošću ispiranja nakon obrade određuje se kakvo će se ispiranje obavljati prema zadanim postavkama. Ispiranje nakon obrade traje otprilike 30 minuta. Ispiranje radi održavanja traje otprilike 90 minuta.

1. U glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu **Run Settings** (Postavke obrade).
3. Odaberite **Post Run Wash** (Ispiranje nakon obrade) ili **Maintenance Wash** (Ispiranje radi održavanja).

Postavljanje mogućnosti automatskog pokretanja obrade

MiSeqDx se može konfigurirati tako da obradu sekvenciranjem započne automatski nakon što uspješno provede automatsku provjeru. Pristup razine administratora za Local Run Manager potreban je za konfiguriranje te značajke.

1. U glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu **Run Settings** (Postavke obrade).
3. Odaberite okvir **Start run after pre-run check. Do not prompt for confirmation.** (Pokreni obradu nakon provjere prije obrade. Nemoj tražiti potvrdu.).
Ako je ta postavka onemogućena, obradu je potrebno pokrenuti ručno nakon provjere prije obrade.

Uključivanje proaktivne podrške tvrtke Illumina

1. U glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
 2. Odaberite karticu Proactive (Proaktivno).
- Da biste omogućili uslugu za praćenje Illumina Proactive, odaberite **Send Instrument Health** (Slanje informacija o stanju instrumenta). Naziv postavke u sučelju softvera možda će se razlikovati od naziva u ovom vodiču, ovisno o verziji MOS koja se upotrebljava.
Dok je ta postavka uključena, podatci o radu instrumenta šalju se tvrtki Illumina. Na temelju tih podataka Illumina lakše otklanja poteškoće i prepoznaje potencijalne pogreške, što omogućuje proaktivno održavanje i smanjenje vremena trajanja praznog hoda instrumenta. Dodatne informacije o prednostima te usluge potražite u dokumentu *Illumina Proactive Technical Note (Tehnička napomena o usluzi Illumina Proactive, broj dokumenta 1000000052503)*.
Ta usluga:
 - ne šalje podatke o sekvenciranju
 - zahtijeva vezu instrumenta s mrežom koja ima pristup internetu
 - po zadanom je isključena. Da biste uključili tu uslugu, omogućite postavku **Send Instrument Health** (Slanje informacija o stanju instrumenta).
 - Da biste omogućili uslugu za praćenje Illumina Proactive, odaberite **Send instrument health information to Illumina to aid technical support** (Slanje informacija o stanju instrumenta tvrtki Illumina radi pomoći tehničkoj podršci). Naziv postavke u sučelju softvera možda će se razlikovati od naziva u ovom vodiču, ovisno o verziji MOS koja se upotrebljava.

Dok je ta postavka uključena, podatci o radu instrumenta šalju se tvrtki Illumina. Na temelju tih podataka Illumina lakše otklanja poteškoće i prepoznaje potencijalne pogreške, što omogućuje proaktivno održavanje i smanjenje vremena trajanja praznog hoda instrumenta. Dodatne informacije o prednostima te usluge potražite u dokumentu *Illumina Proactive Technical Note (Tehnička napomena o usluzi Illumina Proactive, broj dokumenta 1000000052503)*.

Ta usluga:

- ne šalje podatke o sekvenciranju
- zahtijeva vezu instrumenta s mrežom koja ima pristup internetu
- po zadanom je isključena. Da biste uključili tu uslugu, omogućite postavku **Send instrument health information to Illumina to aid technical support** (Slanje informacija o stanju instrumenta tvrtki Illumina radi pomoći tehničkoj podršci).

3. Na padajućem popisu odaberite regiju u kojoj se nalazi glavno računalo s kojim bi se instrument trebao povezivati.

Postavljanje preferencija za e-poštu

MiSeqDx se može konfigurirati tako da e-poštom šalje obavijest kad se dovrši analiza RTA, kad se dovrši sekundarna analiza na instrumentu ili ako dođe do kritične pogreške softvera MiSeqDx. Konfiguracija se najčešće postavlja tijekom instalacije instrumenta MiSeqDx. Pristup razine administratora softvera Local Run Manager potreban je za upotrebu te značajke.

1. U glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu **Email Notifications** (Obavijesti e-poštom).
3. Unesite sljedeće podatke:
 - **Local SMTP email server address** (Adresa lokalnog SMTP poslužitelja e-pošte) – s pomoću zaslonske tipkovnice unesite adresu lokalnog SMTP poslužitelja e-pošte. Taj podatak, ako je potrebno, zatražite od administratora ustanove.
 - **Sender address** (Adresa pošiljatelja) – s pomoću zaslonske tipkovnice unesite adresu e-pošte pošiljatelja. To može biti vaša adresa e-pošte ili neka druga adresa e-pošte koja je određena za slanje obavijesti e-poštom. Naziv domene u adresi e-pošte pošiljatelja mora biti jednak adresi poslužitelja e-pošte.
 - **Recipient addresses** (Adrese primatelja) – s pomoću zaslonske tipkovnice unesite adrese e-pošte svih primatelja obavijesti. Adrese e-pošte razdvojite zarezom. Odaberite **Test** da biste poslali probnu poruku e-pošte primateljima obavijesti.
 - **Notify via email when** (Šalji obavijest e-poštom kada) – potvrdite okvir uz svaki događaj obrade za koji želite da aktivira slanje obavijesti.

NAPOMENA Tijekom dijagnostičke obrade dopuštena je jedna pogreška očitavanja RFID-a. Ako nije moguće očitati RFID na dvije komponente potrošnog materijala, softver ne može nastaviti na sljedeći korak postavljanja obrade. Ako dođe do te pogreške, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina. Ako odaberete opciju **Notify via email when** (Šalji obavijest e-poštom kada) i potvrdni okvir **On-Instrument analysis is complete** (Dovršena je analiza na instrumentu), obavijesti e-poštom šalju se samo ako obrada nije konfigurirana za slanje podataka o sekvenciranju softveru BaseSpace Sequence Hub.

Postavljanje zadane lokacije izlazne mape

Mapa Output (Izlaz) instrumenta MiSeqDx određuje zadanu lokaciju za izlazne datoteke analize. Mape se mogu nalaziti na lokalnoj mreži ili na računalu instrumenta. Promijenite zadanu mapu Output (Izlaz) u mrežnu lokaciju da biste je mogli dijeliti ili pohraniti na dulje vrijeme.

Za konfiguriranje te značajke potreban je pristup razine korisnika administratora softvera Local Run Manager.

1. U glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu Run Settings (Postavke obrade).
3. U polje Output Folder (Izlazna mapa) unesite put do lokacije mape.

Pazite da unesete cijeli UNC put, npr. `\\YourServer\Path\OutputFolder`.



UPOZORENJE

Ako upotrebljavate mapirani pogon kao što je, primjerice `Z:\OutputFolder`, analiza obrade sekvenciranjem neće se dovršiti.

Obavezan potrošni materijal

Potrošni materijal

Potrošni materijal za sekvenciranje koji je potreban za obrade na instrumentu MiSeqDx isporučuje se zasebno u kompletu za *in vitro* dijagnostiku.

Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik

Prije početka obrade provjerite imate li na raspolaganju sljedeći potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik.

Potrošni materijal	Svrha
Alkoholne maramice sa 70 % izopropila ili 70-postotni etanol	Čišćenje stakla i nosača protočnog članka.
Laboratorijske maramice s malo dlačica	Čišćenje nosača protočnog članka.
Papir za leće, 4 x 6 inča	Čišćenje protočnog članka.
Epruvete MiSeq	Ispiranje voda predložaka (nije obavezno).
NaOCl, 5 %	Ispiranje voda predložaka (nije obavezno).
Tween 20	Pranje instrumenta.
Pinceta, kvadratnog vrha, plastična (nije obavezno)	Vađenje protočnog članka iz spremnika za slanje protočnog članka.
Voda, laboratorijske kvalitete	Pranje instrumenta.

Smjernice za vodu laboratorijske kvalitete

Za postupke na instrumentu uvijek upotrebljavajte vodu ili deioniziranu vodu laboratorijske kvalitete. Nipošto nemojte upotrebljavati vodu iz slavine.

Upotrebljavajte samo vodu sljedeće razine kvalitete ili ekvivalente:

- deionizirana voda
- Illumina PW1
- voda od 18 megaoma (MΩ)
- voda Milli-Q
- voda Super-Q
- voda za primjenu u molekularnoj biologiji

Skladištenje i rukovanje

Element	Specifikacija
Temperatura	Prijevoz: od -10 °C do 40 °C (od 14 °F do 104 °F) Skladištenje: od 15 °C do 30 °C (od 59 °F do 86 °F) Radni uvjeti: od 19 °C do 25 °C (od 66 °F do 77 °F)
Vlažnost	Prijevoz i skladištenje: vlaga bez kondenzacije Radni uvjeti: relativna vlažnost 30 – 75 % (bez kondenzacije)

Sekvenciranje

Uvod

Da biste pokrenuli obradu na instrumentu MiSeqDx, slijedite korake za postavljanje opisane u ovom poglavlju. Kad započne obrada, više nije potrebno ništa činiti.

Nakon dovršetka postupka sekvenciranja pokrenite ispiranje instrumenta.

Trajanje obrade

Trajanje obrade temelji se na broju izvršenih ciklusa. Ovisno o verziji reagensa MiSeqDx, MiSeqDx može provesti obradu sekvenciranjem uparenih krajeva u do 2 x 301 ciklus sekvenciranja.

Broj ciklusa u očitanju

Broj ciklusa koji se provedu u očitanju veći je za jedan od broja analiziranih ciklusa. Taj je dodatni ciklus nužan za izračune pri određivanju faza i predfaza.

Tijekom obrade uparenih krajeva u 150 ciklusa, primjerice, provedu se dva očitavanja 151 ciklusa (2 x 151), tj. ukupno 302 ciklusa plus eventualni ciklusi za očitavanje indeksa. Na kraju obrade analizira se 2 x 150 ciklusa.

Generiranje klastera

Tijekom generiranja klastera pojedinačne molekule DNK-a vežu se za površinu protočnog članka, a potom amplifikacijom uz nadsvođivanje formiraju klastere.

Sekvenciranje

Klasteri se nakon generiranja snimaju uz kombinaciju LED-a i filtra koja je specifična za svaki od četiri fluorescentno označena dideksinukleotida. Nakon dovršetka snimanja jedne pločice protočnog članka članak se pomiče radi ekspozicije sljedeće pločice. Taj se postupak ponavlja dok se ne snime sve pločice. Nakon analize slika softver provodi primarnu analizu, koja obuhvaća određivanje baza, filtriranje i ocjenjivanje kvalitete.

Analiza

Kad obrada završi, automatski se pokreće softver za analizu Local Run Manager radi provođenja sekundarne analize.


Sekundarnu analizu moguće je putem internetske veze nadzirati s drugog računala ako se to računalo nalazi na istoj mreži kao MiSeqDx. Pogledajte *Referentni priručnik za softver Local Run Manager v4 za MiSeqDx (broj dokumenta 200046657)*.

Priprema uloška reagensa

U sljedećim se uputama opisuje postupak otapanja uloška reagensa s pomoću vodene kupke sobne temperature.

1. Otopite uložak reagensa u vodenoj kupki s dovoljnom količinom deionizirane vode sobne temperature da se postolje uloška reagensa u nju potopi do crte za vodu otisnute na ulošku reagensa. Pazite da voda ne prelazi crtu za maksimalnu količinu vode.
2. Izvadite uložak reagensa iz spremišta u kojem je temperatura od $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
3. Postavite uložak reagensa u vodenu kupku s dovoljnom količinom deionizirane vode sobne temperature da se potopi postolje uloška reagensa. Pazite da voda ne prelazi crtu za maksimalnu količinu vode koja je otisnuta na ulošku reagensa.

Slika 3 Crtu za maksimalnu količinu vode

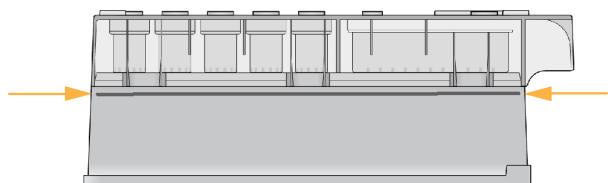

4. Pričekajte da se uložak reagensa potpuno otopi u vodenoj kupki sobne temperature. Vrijeme otapanja traje približno od 60 do 90 minuta, ovisno o vrsti uloška reagensa. Dodatne informacije potražite u uputama za analizu.
5. Izvadite uložak iz vodene kupke te nježno njime lupkajte po radnoj površini da biste izbacili vodu iz postolja uloška. Osušite postolje uloška. Pazite da voda ne poprskava gornji dio uloška reagensa.

Provjera uloška reagensa

1. Deset puta preokrenite uložak reagensa da biste pomiješali otopljene reagense, a potom provjerite jesu li svi položaji otopljeni.
2. Provjerite jesu li reagensi na položajima 1, 2 i 4 potpuno pomiješani i bez taloga.

NAPOMENA Za pravilno sekvenciranje ključno je da reagensi u ulošku budu potpuno otopljeni i pomiješani.

3. Nježno uloškom lupkajte po radnoj površini da biste smanjili broj mjehurića zraka u reagensima.

NAPOMENA Na dnu svakog spremnika nalaze se cjevčice za doziranje MiSeqDx koje služe za aspiraciju reagensa pa je važno da u spremnicima nema mjehurića zraka.

4. Uložak reagensa držite na ledu ili ga odložite u spremište u kojem je temperatura od 2 °C do 8 °C (do šest sati) dok ne budete spremni za postavljanje obrade. Da biste postigli najbolje rezultate, odmah umetnite uzorak i postavite obradu.

Umetanje biblioteka uzoraka u uložak


Kad se uložak reagensa potpuno otopi te bude spreman za upotrebu, u uložak možete umetnuti uzorke.

1. Zasebnim, čistim i praznim vrhom pipete od 1 ml probijte zatvarač od folije na spremniku uložka reagensa označenom **Load Samples** (Umetnite uzorke).

NAPOMENA Nemojte probijati nijedan drugi položaj reagensa. Drugi položaji reagensa probit će se automatski tijekom obrade.

2. Pipetom prenesite 600 µl biblioteka uzoraka pripremljene razrijeđene biblioteke amplikona (DAL) u spremnik **Load Samples** (Umetnite uzorke). Nemojte dirati zatvarač od folije.
3. Nakon umetanja uzorka provjerite da u spremniku nema mjehurića zraka. Ako ima mjehurića, nježno udarite uloškom po radnoj površini da bi mjehurići izašli.

Slika 4 Umetanje biblioteka

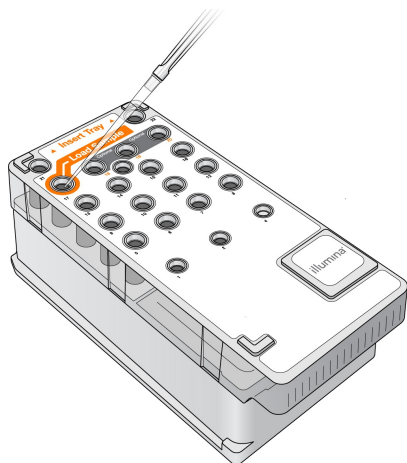

4. Prijedite izravno na korake za postavljanje obrade s pomoću sučelja Operacijski softver MiSeq (MOS).

Prijava i praćenje uputa za sekvenciranje

1. Na početnom zaslonu odaberite **Sequence** (Sekvenciranje).
2. Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite odgovarajuće korisničke vjerodajnice, zatim odaberite **Next** (Dalje). Nakon prijave ponovno odaberite **Sequence** (Sekvenciranje).
3. Na popisu odaberite obradu.
4. **[Neobavezno]** Odaberite **Preview Samples** (Pretpregled uzoraka) da biste vidjeli popis uzoraka u obradi.


5. Odaberite **Next** (Dalje).
6. Slijedite upute za umetanje protočnog članka i reagensa te postavite obradu (opisano u sljedećim odjeljcima).

Čišćenje protočnog članka

Protočni članak uronjen je u pufer za čuvanje u spremniku protočnog članka.

1. Navucite novi par rukavica bez pudera.
2. Plastičnom hvataljkom uhvatite protočni članak za postolje plastičnog uložka te ga izvadite iz spremnika protočnog članka.


Slika 5 Vađenje protočnog članka

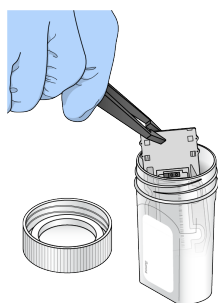

3. Nježno ispirite protočni članak vodom laboratorijske kvalitete pazeći da temeljito isperete i stakleni i plastični uložak od viška soli.


Višak soli može utjecati na to kako protočni članak sjeda na instrument. Ako se soli osuše u području za snimanje, to može utjecati i na snimke.

Slika 6 Ispiranje protočnog članka

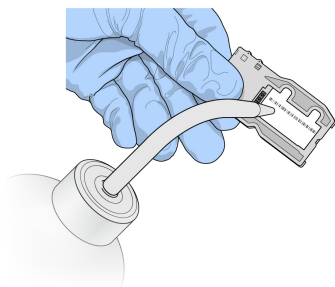

4. Temeljito posušite protočni članak i uložak rupčićem za čišćenje objektiva koji ne ispušta dlačice uz osobit oprez na dijelovima oko crne brtve na priključku protočnog članka (prikazanoj na sljedećoj ilustraciji). Nježno lupkanjem posušite područje brtve i staklo uz nju.


Slika 7 Priključci i brtva protočnog članka

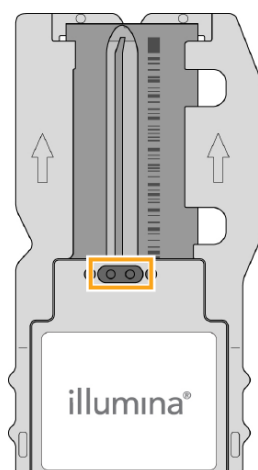

5. Staklo protočnog članka očistite alkoholnom maramicom. Pazite da na staklu ne ostane crta, otisaka prstiju ni dlačica ili vlakana s rupčića.

NAPOMENA Nemojte upotrebljavati alkoholnu maramicu na brtvi priključka protočnog članka.

Slika 8 Sušenje protočnog članka

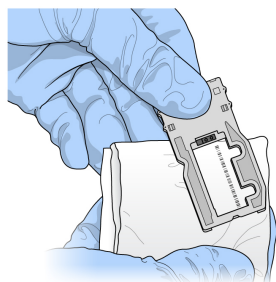


6. Višak alkohola posušite rupčićem za čišćenje objektiva koji ne ispušta dlačice.
7. Provjerite da ništa ne zatvara priključke protočnog članka te da brtva čvrsto sjedi oko priključaka protočnog članka.
Ako vam se čini da brtva ne sjedi na mjestu, nježno je pritisnite i vratite na mjesto oko priključaka protočnog članka.

Umetanje protočnog članka


1. Podignite vratašca odjeljka za protočni članak pa pritisnite gumb za otpuštanje koji se nalazi desno od zasuna protočnog članka. Otvorit će se zasun protočnog članka.

Slika 9 Otvaranje zasuna protočnog članka

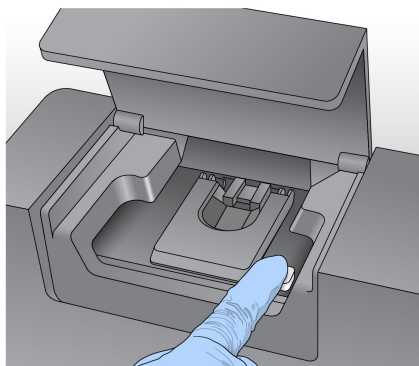


2. Provjerite da u nosaču protočnog članka nema dlačica. U slučaju prisutnosti dlačica ili neke druge prljavštine, očistite nosač protočnog članka alkoholnom maramicom ili rupčićem navlaženim etanolom ili izopropanolom. Oprezno brišite površinu nosača protočnog članka dok ne bude čista i suha.
3. Držeći ga za rubove uloška protočnog članka, postavite protočni članak na nosač.

Slika 10 Postavljanje protočnog članka na nosač

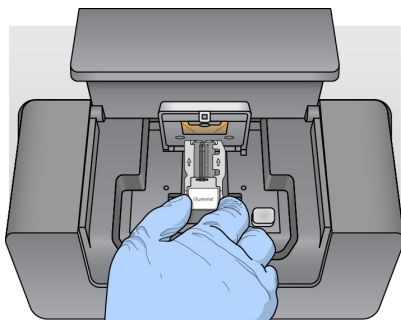

4. Nježno pritisnite zasun protočnog članka prema dolje da biste ga zatvorili preko protočnog članka. Kad se zatvori zasun protočnog članka, iglice za poravnanje postavit će protočni članak na odgovarajuće mjesto. Škljocaj označava da je zasun protočnog članka pričvršćen.

Slika 11 Zatvaranje zasuna protočnog članka

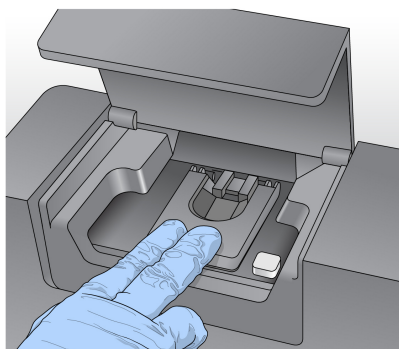

5. Ako softver ne prepozna RFID protočnog članka, pročitajte odjeljak [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

NAPOMENA Ako nije moguće očitati RFID, identifikacijske podatke možete unijeti ručno. Međutim, softver dopušta pogrešku samo na jednoj od triju komponenti označenih RFID-om (protočni članak, uložak reagensa, Otopina SBS MiSeqDx (PR2)) tijekom obrade za in vitro dijagnostiku. Za više informacija pogledajte [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).


6. Zatvorite vratašca odjeljka za protočni članak.
7. Odaberite **Next** (Dalje).

Umetanje reagensa

Umetanje boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2) i provjera boce za otpad


1. Izvadite bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) iz spremišta u kojem je temperatura od 2 °C do 8 °C. Preokrenite je da biste je promiješali, a potom uklonite poklopac.
2. Otvorite vratašca odjeljka za reagense.
3. Podižite ručku dozatora dok se ne blokira na mjestu.
4. Izvadite bocu za ispiranje pa umetnite bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2).

Slika 12 Umetnite bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2).

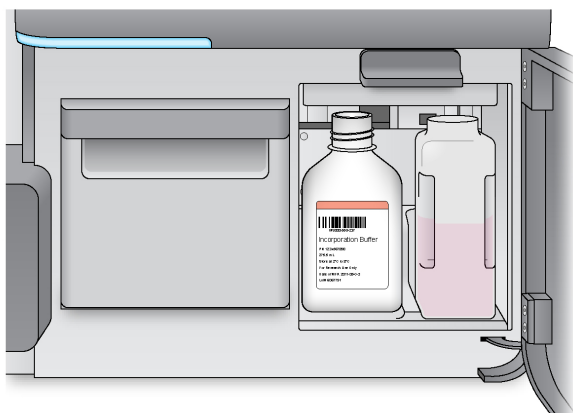

5. Sadržaj boce za otpad ispraznite u odgovarajući spremnik.
6. Polako spuštajte ručku dozatora. Pazite da se dozatori spuste u bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) i bocu za otpad.

Slika 13 Spuštanje ručke dozatora

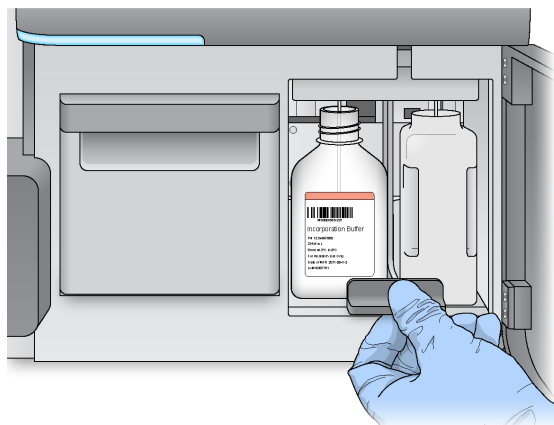

7. Ako softver ne prepozna RFID boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2), pogledajte odjeljak [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

NAPOMENA Ako nije moguće očitati RFID, identifikacijske podatke možete unijeti ručno. Međutim, softver dopušta pogrešku samo na jednoj od triju komponenti označenih RFID-om (protočni članak, uložak reagensa, Otopina SBS MiSeqDx (PR2)) tijekom obrade za in vitro dijagnostiku. Za više informacija pogledajte [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

8. Odaberite **Next** (Dalje).


Umetanje uložka reagensa

1. Otvorite vratašca hladnjaka reagensa.

NAPOMENA Vratašca hladnjaka reagensa nemojte tijekom duljeg vremena ostavljati otvorena.

2. Uložak reagensa držite za kraj na kojem se nalazi oznaka Illumina te ga gurajte u hladnjak reagensa dok ne zastane.

Slika 14 Umetanje uložka reagensa

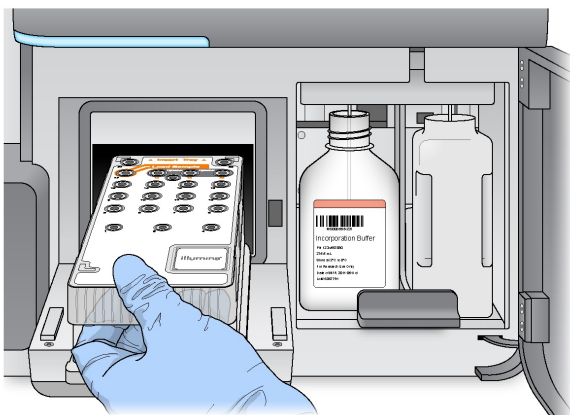

3. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
4. Ako softver ne prepozna RFID uložka reagensa, pogledajte odjeljak [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

NAPOMENA Ako nije moguće očitati RFID, identifikacijske podatke možete unijeti ručno. Međutim, softver dopušta pogrešku samo na jednoj od triju komponenti označenih RFID-om (protočni članak, uložak reagensa, Otopina SBS MiSeqDx (PR2)) tijekom obrade za in vitro dijagnostiku. Za više informacija pogledajte [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

5. Da biste pokrenuli obradu, odaberite neku od sljedećih mogućnosti.
 - Ako sustav nije konfiguriran tako da se nakon uspješne provjere automatski pokrene, odaberite **Start Run** (Započni obradu).
 - Ako sustav jest konfiguriran tako da se nakon uspješne provjere automatski pokrene, obrada sekvenciranjem započinje automatski. Ne morate biti prisutni. Međutim, ako tijekom provjere dođe do bilo kakve pogreške, obrada ne započinje automatski.

NAPOMENA Ako temperatura hladnjaka reagensa nije unutar navedenog raspona, obrada sekvenciranjem možda se neće moći pokrenuti. Pogledajte [Rješavanje pogrešaka s temperaturom hladnjaka reagensa na stranici 43](#).

Važna napomena prije pokretanja obrade



UPOZORENJE

MiSeqDx je osjetljiv na vibracije. Dodirivanjem instrumenta nakon pokretanja obrade možete negativno utjecati na rezultate sekvenciranja.

Kad umetnete uložak reagensa i zatvorite vratašca odjeljka za reagense, nemojte otvarati vratašca odjeljka za protočni članak ni odjeljka za reagense. Monitor instrumenta dodirujte isključivo radi pauziranja obrade. Za više informacija pogledajte [Pauziranje obrade na stranici 37](#).



UPOZORENJE

Prije pokretanja obrade obavezno zatvorite sve datoteke na instrumentu MiSeqDx i nemojte otvarati datoteke tijekom obrade.


Nadzor obrade

Tijekom obrade nadzirite pojedinosti o obradi putem zaslona Sequencing (Sekvenciranje) na instrumentu. Zaslona Sequencing (Sekvenciranje) služi samo za prikaz.

Za nadzor obrade na daljinu možete upotrebljavati i Local Run Manager ako je instrument povezan s istom mrežom.

U softveru Local Run Manager prikazuju se tijekom obrade i informacije o sekvenciranju (ukupan broj klastera, % klastera koji prolaze filter, postotak 1. i 2. očitavanja $\geq$ Q30 te zadnji ocijenjeni ciklus). Za više informacija pogledajte [Softver Local Run Manager na stranici 5](#).

1. Na zaslonu instrumenta Sequencing (Sekvenciranje) nadzirite tijekom obrade, intenzitete i rezultate kvalitete koji se prikazuju.
 - **Run Progress** (Tijek obrade) – na statusnoj traci prikazuje tijek obrade te navodi broj dovršenih ciklusa.
 - **Intensity** (Intenzitet) – prikazuje vrijednost intenziteta klastera u 90. percentilu za svaku pločicu. Grafički prikaz u području Intensity (Intenzitet) predstavlja broj pločica koje se snimaju.
 - Ako se snima samo gornja površina protočnog članka, prikazuje se grafikon s jednim stupcem.
 - Ako se snimaju gornja i donja površina protočnog članka, prikazuje se grafikon s dva stupca.

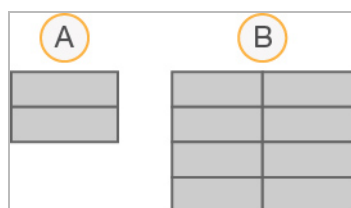

- A. Označava dvije pločice, samo gornja površina
- B. Označava četiri pločice, gornja i donja površina

- **Q-Score All Cycles** (Ocjena kvalitete za sve cikluse) – prikazuje prosječni postotak baza ocjene kvalitete (Q-score) veće od Q30. Ocjena kvalitete služi za predviđanje vjerojatnosti pogrešnog očitavanja baza. Ocjene kvalitete izračunavaju se nakon 25. ciklusa.

Ocjena kvalitete	Vjerojatnost pogrešnog očitavanja baza
Q40	1 : 10.000
Q30	1 : 1000
Q20	1 : 100
Q10	1 : 10

- **Cluster Density (K/mm²)** (Gustoća klastera (K/mm²)) – prikazuje broj klastera po četvornom milimetru za obradu. U optimalnom slučaju očekivana je gustoća klastera 800 K/mm².

NAPOMENA Čistoća otkrivanja baza omjer je intenziteta najjačeg signala podijeljenog zbrojem dvaju najjačih signala. Ako tijekom prvih 25 ciklusa više od jednog očitavanja baza ima vrijednost čistoće manju od 0,6; očitavanja ne prolaze filter kvalitete.

- **Estimated Yield (Mb)** (Procijenjen prinos (Mb)) – prikazuje predviđeni broj baza očitanih tijekom obrade koji se mjeri u megabazama. Ti se podatci prikazuju tek nakon 25. ciklusa.
2. Kad završi obrada, prikazuje se gumb Next (Dalje). Prije nastavka pregledajte rezultate na zaslonu Sequencing (Sekvenciranje).

NAPOMENA Zaslon Sequencing (Sekvenciranje) prikazuje se dok ne odaberete Next (Dalje). Nakon što odaberete Next (Dalje), povratak na zaslon Sequencing (Sekvenciranje) više nije moguć.

3. Odaberite **Next** (Dalje) da biste zatvorili zaslon Sequencing (Sekvenciranje) i nastavili na ispiranje nakon obrade.

Generiranje predloška

Softver Real-Time Analysis (RTA) upotrebljava prva četiri ciklusa obrade sekvenciranjem za generiranje predložaka. Generiranje predložaka postupak je kojim se definiraju položaji klastera preko cijele površine protočnog članka prema položaju koordinata X i Y.

Nakon generiranja predloška položaja klastera slike koje se snimaju tijekom svakog sljedećeg ciklusa snimanja poravnavaju se u odnosu na predložak. Izdvajaju se intenziteti pojedinačnih klastera u sva četiri kanala boja nukleotida te se od normaliziranih intenziteta klastera stvaraju očitavanja baza.

Mjerni podatci obrade

Mjerni podatci obrade prikazuju se na zaslonu Sequencing (Sekvenciranje) u različitim trenutcima tijekom obrade. Tijekom koraka za generiranje klastera ne prikazuju se mjerni podatci.

Nakon početka sekvenciranja prikazuju se sljedeći mjerni podatci u navedenim ciklusima:

Ciklus	Mjerni podatci
Ciklus 1 – 4	Intenzitet
Ciklus 4 – 25	Intenzitet i gustoća klastera
Od ciklusa 25 do dovršetka obrade	Intenzitet, gustoća klastera, % prolaznosti kroz filtar, prinos i ocjene kvalitete

Provođenje ispiranja nakon obrade

Ispiranje nakon obrade standardno je ispiranje instrumenta koje se obavlja između postupaka sekvenciranja. Nakon dovršetka obrade sekvenciranjem obavezno provedite ispiranje instrumenta. Slijedite upute softvera za umetanje komponenti za ispiranje te provođenje ispiranja. Ispiranje nakon obrade traje približno 20 minuta.

Ispiranje pokrenite odmah nakon obrade. Ispiranje instrumenta obavezno je da bi se mogla postaviti sljedeća obrada. Da biste ispiranje nakon obrade proveli u nekom drugom trenutku, a ne izravno nakon obrade, ispiranje pokrenite s pomoću naredbe na zaslonu Perform Wash (Provođenje ispiranja).

Redovitim ispiranjima instrumenta jamče se dosljedne radne značajke na sljedeći način:

- ispiru se svi ostatci reagensa iz vodova za fluide i dozatora
- sprječavaju se nakupljanje i kristalizacija soli na vodovima za fluide i dozatorima
- sprječava se križna kontaminacija iz prethodne obrade.

Imate mogućnost provesti ispiranje nakon obrade koje obuhvaća ispiranje voda predložaka otopinom natrijeva hipoklorita (NaOCl). To ispiranje traje približno 30 minuta. Pogledajte [Postupak uz ispiranje voda predložaka na stranici 26](#).

NAPOMENA Iskorišteni protočni članak ostavite na instrumentu. Za ispiranje instrumenta u instrument mora biti umetnut protočni članak.

Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik

- Tween 20 (Sigma-Aldrich, kataloški broj P7949)
- Voda laboratorijske kvalitete
- NaOCl (upotrebljava se za ispiranje nakon obrade koje obuhvaća ispiranje voda predložaka)
- Epruveta MiSeq (kataloški br. MS-102-9999) (za ispiranja nakon obrade koja obuhvaćaju ispiranje voda predložaka)

Postupak

1. Pripremite svježu otopinu za ispiranje sa sredstvom Tween 20 i vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način:
 - a. dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
 - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
 - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Pripremite komponente za ispiranje sa svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20 na sljedeći način:
 - a. U svaki spremnik plitice za ispiranje dodajte 6 ml otopine za ispiranje.
 - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
3. Na zaslonu za ispiranje koji se prikazuje nakon obrade odaberite **Start Wash** (Pokreni ispiranje). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa. Prije nastavka pričekajte nekoliko sekundi da se dozatori podignu do kraja.

*Nemojte odabrati **Perform optional template line wash** (Provedi neobavezno ispiranje voda predložaka) na zaslonu za ispiranje nakon obrade. Za ispiranje voda predložaka potreban je drugačiji postupak. Pogledajte [Postupak uz ispiranje voda predložaka na stranici 26](#).*
4. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni uložak reagensa iz hladnjaka.
5. Gurnite pliticu za ispiranje do kraja u hladnjak reagensa pa zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
6. Podižite ručku dozatora ispred boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2) i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu.
7. Uklonite bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) te je zamijenite bocom za ispiranje.

NAPOMENA Bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) bacite nakon svake obrade. Nemojte upotrebljavati preostalu Otopinu SBS MiSeqDx (PR2).

8. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.



UPOZORENJE

Taj skup reagensa sadrži potencijalno opasne kemikalije. Uslijed udisanja, gutanja te dodira s kožom i očima može doći do tjelesnih ozljeda. Ventilacija mora biti prikladna za rukovanje opasnim materijalima u reagensima. Nosite zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči, rukavice i laboratorijsku kutu prikladnu za rizik od izlaganja. Iskorištenim reagensima rukujte kao kemijskim otpadom i zbrinite ih u skladu s odgovarajućim regionalnim, nacionalnim i mjesnim zakonima i propisima. Dodatne informacije o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti potražite na sigurnosno-tehničkom listu (SDS) na adresi support.illumina.com/sds.html.

9. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
10. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
11. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će ispiranje nakon obrade.

Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

NAPOMENA Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.


Postupak uz ispiranje voda predložaka

1. Pripremite svježu otopinu za ispiranje sa sredstvom Tween 20 i vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način.
 - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
 - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
 - c. Promiješajte je tako da je pet puta preokrenete.
2. Pripremite svježu otopinu NaOCl-a za ispiranje s vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način.
 - a. Dodajte 36 µl 5-postotnog NaOCl-a u 864 µl vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti razrjeđenje NaOCl-a u omjeru 1 : 25.
 - b. Dodajte 50 µl razrijeđenog NaOCl-a u omjeru 1 : 25 u 950 µl vode laboratorijske kvalitete u epruveti MiSeq (kataloški br. MS-102-9999).

NAPOMENA Važno je upotrebljavati točnu koncentraciju NaOCl-a. Obavezno provjerite postotak koncentracije NaOCl-a na naljepnici proizvoda. Ako je koncentracija prevelika, generiranje klastera prilikom sljedećih obrada možda neće uspjeti. Ako vam nije dostupan 5-postotni NaOCl, napravite 1 ml otopine 0,01-postotnog NaOCl-a u vodi laboratorijske kvalitete. NaOCl nemojte upotrebljavati prilikom ispiranja radi održavanja ni prilikom ispiranja u stanju mirovanja.

3. Pripremite komponente za ispiranje sa svježom otopinom za ispiranje na sljedeći način.
 - a. Dodajte 6 ml otopine za ispiranje u svaki spremnik plitice za ispiranje, osim spremnika s brojem 17.

Slika 15 Epruveta MiSeq na položaju 17 u plitici za ispiranje

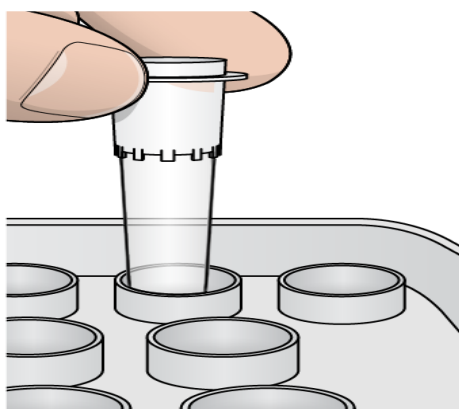

NAPOMENA Pazite da epruvetu MiSeq s NaOCl-om umetnete isključivo u položaj 17 u plitici. Umetanje epruvete u neki drugi položaj može dovesti do neuspjeha generiranja klastera prilikom sljedećih obrada i može oštetiti sustav fluida instrumenta MiSeqDx.

4. Nakon dovršetka obrade odaberite **Start Wash** (Pokreni ispiranje). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa.
5. Odaberite **Perform optional template line wash** (Provedi neobavezno ispiranje voda predložaka) na zaslonu Post-Run Wash (Ispiranje nakon obrade). Prilikom upotrebe tijeka rada VeriSeq PGS unaprijed je odabrana mogućnost **Perform optional template line wash** (Provedi neobavezno ispiranje voda predložaka). MCS prati koja se vrsta ispiranja provela nakon svake obrade. Ako **za ispiranje nakon obrade nije odabrana mogućnost Perform optional template line wash** (Provedi neobavezno ispiranje voda predložaka), poruka na zaslonu Run Review (Pregled obrade) podsjetit će vas na to kad sljedeći put pokrenete postupak sekvenciranja.
6. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni uložak reagensa iz hladnjaka.
7. Gurnite pliticu za ispiranje do kraja u hladnjak reagensa pa zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.

8. Podižite ručku dozatora ispred boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2) i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu.
9. Uklonite bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) te je zamijenite bocom za ispiranje.

NAPOMENA Bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) bacite nakon svake obrade. Nemojte upotrebljavati preostalu Otopinu SBS MiSeqDx (PR2).

10. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.



UPOZORENJE

Taj skup reagensa sadrži potencijalno opasne kemikalije. Uslijed udisanja, gutanja te dodira s kožom i očima može doći do tjelesnih ozljeda. Nosite zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči, rukavice i laboratorijsku kutu prikladnu za rizik od izlaganja. Iskorištenim reagensima rukujte kao kemijskim otpadom i zbrinite ih u skladu s odgovarajućim regionalnim, nacionalnim i mjesnim zakonima i propisima. Za dodatne informacije o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti, pogledajte Sigurnosno-tehnički list (SDS) na adresi support.illumina.com/sds.html.

11. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
12. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
13. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će ispiranje nakon obrade.
Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

NAPOMENA Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.

b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.

14. Epruvetu MiSeq s 0,01-postotnom otopinom NaOCl-a za ispiranje postavite u spremnik 17 na plitici za ispiranje tako da grlo epruvete bude u ravnini s pliticom.

Održavanje

Učestalost održavanja

Aktivnosti održavanja opisane u ovom poglavlju provodite prema intervalima navedenima u sljedećim tablicama.

Tablica 1 Održavanje tijekom normalnog rada

Aktivnost	Mjesečno	Prema potrebi
Ispiranje radi održavanja	X	
Ispiranje u stanju mirovanja		Radi pripreme za razdoblje neaktivnosti (≥ 7 dana bez upotrebe)
Isključivanje instrumenta		X

Tablica 2 Održavanje tijekom neaktivnosti (≥ 7 dana bez upotrebe)

Aktivnost	Mjesečno	Prema potrebi
Ispiranje u stanju mirovanja	X	
Isključivanje instrumenta		X

Preventivno održavanje

Illumina preporučuje provođenje jednog preventivnog održavanja svake kalendarske godine. Ako niste pod servisnim ugovorom, obratite se voditelju odnosa s korisnicima za regiju ili službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste dogovorili servis za preventivno održavanje koji se plaća.

Provođenje ispiranja radi održavanja

Ispiranje radi održavanja provodite svakih 30 dana da bi se zajamčile optimalne radne značajke instrumenta. Ispiranje radi održavanja traje približno 90 minuta. Ispiranje se sastoji od tri koraka kojima se temeljito ispiru sustav otopinom za ispiranje koja se sastoji od vode laboratorijske kvalitete i sredstva Tween 20.

Instrument možete konfigurirati tako da se između obrada provodi ispiranje radi održavanja, a ne ispiranje nakon obrade. Pogledajte [Postavljanje mogućnosti ispiranja nakon obrade na stranici 8](#).

Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik

- Tween 20 (Sigma-Aldrich, kataloški broj P7949)
- Voda laboratorijske kvalitete

**OPREZ**

Nakon umetanja plitice za ispiranje te prije pokretanja ispiranja obavezno zatvorite vratašca hladnjaka reagensa. Tim se korakom sprječava ozljeda do koje bi moglo doći ako vam se ruke nađu na putu dozatora tijekom njihova spuštanja.

Postupak

1. Provjerite je li u instrument umetnut iskorišteni protočni članak.
2. Na početnom zaslonu odaberite **Perform Wash** (Provedi ispiranje).
3. Na zaslonu Perform Wash (Provođenje ispiranja) odaberite **Maintenance Wash** (Ispiranje radi održavanja). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa.

NAPOMENA Za svaki korak ispiranja upotrebljavajte svježu otopinu za ispiranje. Ponovnom upotrebom otopine za ispiranje iz prethodnog ispiranja može se vratiti otpad u vodove za fluide.

Provođenje prvog ispiranja

1. Pripremite svježu otopinu za ispiranje sa sredstvom Tween 20 i vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način.
 - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
 - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
 - c. Promiješajte tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Pripremite komponente za ispiranje sa svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20 na sljedeći način.
 - a. U svaki spremnik plitice za ispiranje dodajte 6 ml otopine za ispiranje.
 - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
3. Umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje u instrument:
 - a. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni uložak reagensa ili pliticu za ispiranje iz hladnjaka.
 - b. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
 - c. Podižite ručku dozatora ispred boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2) i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu pa zamijenite bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) bocom za ispiranje.

NAPOMENA Bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) bacite nakon svake obrade. Nemojte upotrebljavati preostalu Otopinu SBS MiSeqDx (PR2).

- d. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
 - e. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
 - f. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
4. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će prvo ispiranje.

Provođenje drugog ispiranja

1. Pripremite svježu otopinu za ispiranje sa sredstvom Tween 20 i vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način.
 - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
 - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
 - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Nakon dovršetka prvog ispiranja izvadite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje te bacite preostalu tekućinu za ispiranje.
3. Na sljedeći način ponovno napunite komponente za pranje svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20.
 - a. U svaki spremnik plitice za ispiranje dodajte 6 ml otopine za ispiranje.
 - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
4. Na sljedeći način umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje:
 - a. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
 - b. Umetnite bocu za ispiranje pa polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
 - c. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
5. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će drugo ispiranje.

Provođenje završnog ispiranja

1. Pripremite svježu otopinu za ispiranje sa sredstvom Tween 20 i vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način.
 - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.

- b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
 - c. Promiješajte tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Nakon dovršetka drugog ispiranja izvadite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje te bacite preostalu tekućinu za ispiranje.
3. Na sljedeći način ponovno napunite komponente za pranje svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20.
 - a. U svaki spremnik plitice za ispiranje dodajte 6 ml otopine za ispiranje.
 - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
4. Na sljedeći način umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje:
 - a. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
 - b. Umetnite bocu za ispiranje pa polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
 - c. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
5. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će završno ispiranje.

Nakon ispiranja

Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

NAPOMENA Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.

Provođenje ispiranja u stanju mirovanja

Ako instrument ne planirate upotrebljavati tijekom sljedećih sedam dana, pripremite ga za neaktivnost ispiranjem u stanju mirovanja. Ispiranjem u stanju mirovanja vodovi fluida pripremaju se za stanje neaktivnosti te se provode dva uzastopna ispiranja eventualnih ostataka reagensa ili nakupljenih soli sa svakog položaja. Svako ispiranje traje približno 60 minuta. Za ispiranje u stanju mirovanja odvojite približno dva sata.

Po dovršetku ispiranja u stanju mirovanja instrument prelazi u stanje mirovanja te se na početnom zaslonu prikazuje poruka u kojoj se navodi status instrumenta. Ako je instrument u stanju mirovanja, prije pokretanja postupka sekvenciranja mora se provesti ispiranje radi održavanja.

NAPOMENA Illumina preporučuje ponavljanje ispiranja u stanju mirovanja *svakih 30 dana* tijekom neaktivnosti instrumenta.

Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik

- Tween 20 (Sigma-Aldrich, kataloški broj P7949)
- Voda laboratorijske kvalitete ili deionizirana voda (smjernice za vodu laboratorijske kvalitete pogledajte u dokumentu *Priručnik za pripremu mjesta za MiSeqDx (broj dokumenta 15070066)*)

Postupak

1. Provjerite je li u instrument umetnut iskorišteni protočni članak.
2. Na početnom zaslonu odaberite **Perform Wash** (Provedi ispiranje).
3. Na zaslonu Wash Options (Mogućnosti ispiranja) odaberite **Standby Wash** (Ispiranje u stanju mirovanja). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa.

NAPOMENA Za svaki korak ispiranja upotrebljavajte svježu otopinu za ispiranje. Ponovnom upotrebom otopine za ispiranje iz prethodnog ispiranja može se vratiti otpad u vodove za fluide.

Provođenje prvog ispiranja

1. Pripremite svježu otopinu za ispiranje sa sredstvom Tween 20 i vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način.
 - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
 - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
 - c. Promiješajte tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Pripremite komponente za ispiranje sa svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20 na sljedeći način.
 - a. U svaki spremnik plitice za ispiranje dodajte 6 ml otopine za ispiranje.
 - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
3. Umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje u instrument:
 - a. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni uložak reagensa ili pliticu za ispiranje iz hladnjaka.
 - b. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
 - c. Podižite ručku dozatora ispred boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2) i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu pa zamijenite bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) bocom za ispiranje.

NAPOMENA Bocu Otopina SBS MiSeqDx (PR2) bacite nakon svake obrade. Nemojte upotrebljavati preostalu Otopinu SBS MiSeqDx (PR2).

- d. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
 - e. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
 - f. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
4. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će prvo ispiranje.

Provođenje drugog ispiranja

1. Pripremite svježu otopinu za ispiranje sa sredstvom Tween 20 i vodom laboratorijske kvalitete na sljedeći način.
 - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
 - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
 - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Nakon dovršetka prvog ispiranja izvadite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje te bacite preostalu tekućinu za ispiranje.
3. Na sljedeći način ponovno napunite komponente za pranje svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20.
 - a. U svaki spremnik plitice za ispiranje dodajte 6 ml otopine za ispiranje.
 - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
4. Na sljedeći način umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje:
 - a. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
 - b. Umetnite bocu za ispiranje pa polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
 - c. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
5. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će drugo ispiranje.

Nakon ispiranja

Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

NAPOMENA Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.

Isključivanje instrumenta

Najbolje je da instrument uvijek bude uključen. Međutim, ako je nužno isključiti instrument, s pomoću sljedećeg postupka isključite Windows te pripremite vodove za fluide.

1. Provedite ispiranje radi održavanja. Za više informacija pogledajte [Postupak na stranici 30](#).
2. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
3. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
4. U glavnom izborniku odaberite **Shut Down Instrument** (Isključi instrument).
Tom ćete naredbom isključiti softver instrumenta.
5. Prekidač napajanja prebacite u položaj OFF (Isključeno).

NAPOMENA Ako je instrument isključen, pričekajte *najmanje* 60 sekundi prije nego što prekidač napajanja vratite u položaj ON (Uključeno).

Otklanjanje poteškoća

Uvod

U ovom se odjeljku opisuju uobičajeni koraci za otklanjanje poteškoća prije obraćanja službi za tehničku podršku tvrtke Illumina. Za većinu se pogrešaka na zaslonu prikazuje poruka s uputama za otklanjanje pogreške.

Za tehnička pitanja posjetite stranice za podršku [MiSeqDx](#) na internetskoj stranici za podršku Illumina. Na stranicama podrške nudi se pristup dokumentaciji, preuzimanjima i čestim pitanjima. Prijavite se u svoj račun My Illumina za pristup biltenima za podršku.

Ako imate problema s kvalitetom obrade ili radnim značajkama, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina. Za više informacija pogledajte [Tehnička pomoć na stranici 47](#).

Predstavnici službe za tehničku podršku tvrtke Illumina najčešće će radi otklanjanja poteškoća tražiti kopije datoteka specifičnih za obradu. Putem značajke Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) na zaslonu Manage Files (Upravljanje datotekama) možete objediniti datoteke potrebne za otklanjanje poteškoća te ih komprimirati u .zip datoteku.

Grupiranje zapisnika radi otklanjanja poteškoća

Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) značajka je kojom se datoteke grupiraju radi slanja službi za tehničku podršku tvrtke Illumina u svrhu otklanjanja poteškoća. Na kartici Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) na zaslonu Manage Files (Upravljanje datotekama) odaberite skupinu odnosno *grupu* datoteka. Grupa se automatski komprimira u .zip datoteku.

Značajkom Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) datoteke jedne obrade grupiraju se u jednu vrstu grupe. Za svaku obradu i za svaku vrstu grupe koju zatraži služba za tehničku podršku tvrtke Illumina ponovite postupak grupiranja zapisnika.

1. Na zaslonu Manage Files (Upravljanje datotekama) odaberite karticu **Bundle Logs** (Grupiranje zapisnika).
2. Odaberite **Browse** (Pregledaj) da biste došli do mape MiSeqOutput.
3. Potvrdite okvir pokraj obrade.
4. Odaberite **Bundle Logs** (Grupiranje zapisnika).
Otvorit će se zaslon Bundle Files (Grupiranje datoteka) s informacijama o grupi, uključujući popis pojedinačnih datoteka unutar grupe.
Dodatne informacije o pojedinačnim mapama i datotekama značajke Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) potražite u dokumentu *MiSeq Output and Analysis Folders Quick Reference Card (Kratka referentna kartica za izlazne mape sustava MiSeq i mape analize, broj dokumenta 15034791)*.
5. Odaberite **Next** (Dalje).
6. Pronađite lokaciju na koju želite spremiti grupirane datoteke kao .zip datoteku.

7. Odaberite **Save** (Spremi).
Kada se dovrši grupiranje datoteka, ponovno će se otvoriti kartica Bundle Logs (Grupiranje zapisnika).
8. Grupu zapisnika u obliku .zip datoteke pošaljite službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

Provođenje provjere sustava

Prije obraćanja službi za tehničku podršku tvrtke Illumina mogu se provesti neke provjere sustava, kao što je testiranje volumena. Testiranjem volumena provjerava se stanje sustava fluida tako što se procjenjuje volumen protoka dok mjehurići prolaze pokraj senzora. Za više informacija pogledajte [Testiranje volumena na stranici 42](#).



OPREZ

Za test prevrtanja/nagiba i potpuno testiranje optike potreban je poseban protočni članak te ih smije obavljati samo tehničar tvrtke Illumina.

1. U glavnom izborniku odaberite **System Check** (Provjera sustava).
2. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Odaberite pojedinačne testove koje želite provesti.
 - Odaberite **Select All** (Odaberi sve) da biste proveli sve testove.
3. Odaberite **Next** (Dalje).
Kada se testiranje dovrši, rezultati testiranja prikazuju se na zaslonu.
4. **[Neobavezno]** Odaberite **Show Details** (Pokaži pojedinosti) da biste pogledali sažetak rezultata na sučelju softvera.
5. **[Neobavezno]** Odaberite **Export Results** (Izvezi rezultate) da biste izvezli rezultate kao *.csv datoteku na USB pogon.
6. Odaberite **Done** (Gotovo).

Pauziranje ili zaustavljanje obrade

MiSeqDx je osmišljen tako da obradu dovrši od početka do kraja bez intervencije korisnika. Međutim, obradu možete pauzirati ili zaustaviti putem zaslona Sequencing (Sekvenciranje).

Pauziranje obrade

Obradu možete privremeno pauzirati prije dovršetka. Obrada se, primjerice, može pauzirati ako sumnjate da je boca za otpad puna. Pauzirane se obrade mogu nastaviti.

Kad odaberete **Pause** (Pauziraj), dovršava se trenutačna naredba, a potom se obrada pauzira i protočni se članak postavlja u sigurno stanje.



OPREZ

Obradu *nemojte* pauzirati tijekom generiranja klastera ni tijekom prvih pet ciklusa sekvenciranja. Obradu pauziranu u to vrijeme nije moguće nastaviti.

Da biste obradu pauzirali sa zaslona Sequencing (Sekvenciranje), odaberite **Pause** (Pauziraj). Natpis na gumbu promijenit će se u **Resume** (Nastavi). Kada želite nastaviti obradu, odaberite **Resume** (Nastavi).


Zaustavljanje obrade

Obradu tijekom sekvenciranja možete zaustaviti i prije dovršetka obrade s pomoću gumba **Stop** (Zaustavi) na zaslonu Sequencing (Sekvenciranje). Obradu možete zaustaviti ako je pogrešno postavljena, ako je kvaliteta podataka loša ili ako dođe do kvara hardvera.

Kada se obrada zaustavi, trenutna se naredba ne dovršava, a nosač protočnog članka pomiče se u prednji položaj. Nastavlja se primarna analiza posljednjeg dovršenog ciklusa.

Da biste zaustavili obradu sa zaslona Sequencing (Sekvenciranje), odaberite **Stop** (Zaustavi).

Slika 16 Zaustavljanje obrade

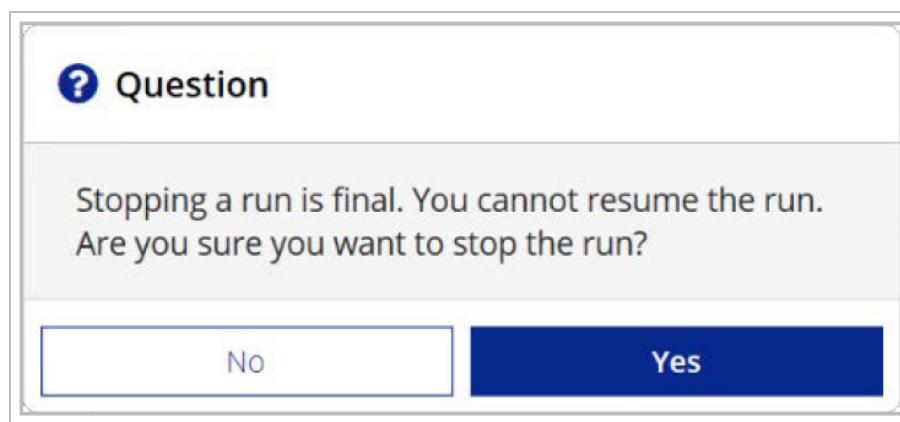

Zaustavljanje obrade ne može se poništiti. Zaustavljena obrada ne može se nastaviti. Jedina je mogućnost nastaviti na ispiranje instrumenta.

Ručno podizanje dozatora s uloška reagensa

Ako se obrada neočekivano prekine ili ako tijekom obrade dođe do pogreške, dozatori s uloška reagensa možda se neće automatski podići. Da biste izvadili uložak reagensa, ručno podignite dozatore s uloška reagensa.

1. Na početnom zaslonu odaberite **Perform Wash** (Provedi ispiranje).
2. Odaberite **Raise Sippers** (Podigni dozatore).
3. Izvadite uložak reagensa.

Otklanjanje pogrešaka u postavljanju obrade

Ako neka od provjera prije obrade ne uspije, pokraj te stavke prikazat će se crvena ikona **X**. Na zaslonu će se prikazati poruka s opisom pogreške i uputama za njezino otklanjanje.

Pogreška	Radnja
X Flow Rate Measured (Izmjerena brzina protoka)	<p>Otvara se zaslon za provjeru brzine protoka. S pomoću padajućeg popisa ili zaslonske tipkovnice unesite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solution (Otopina): PR2 Volume (Volumen): 250 Aspirate Rate (Brzina aspiracije): 2500 Dispense Rate (Brzina izbacivanja): 2500 <p>Odaberite Pump (Pumpaj). Ako se pogreška i dalje pojavljuje, volumen pumpanja Otopina SBS MiSeqDx (PR2) postavite na 500 µl i ponovite postupak. Nakon upumpavanja fluida odaberite Restart Check (Ponovno pokreni provjeru).</p> <p>Kad provjera prije obrade uspije, gumb Start Run (Pokreni obradu) postat će aktivan.</p> <p>Ako provjera protoka ponovno ne uspije, ponovno postavite protočni članak da biste provjerili nije li protok prekinut zbog nepravilnog poravnanja. Provjerite da na brtvi protočnog članka nema dlačica ili nepravilnosti.</p>
X Free Disk Space (Slobodan prostor na disku)	<p>Ako nema dovoljno prostora na disku, prikazat će se poruka u kojoj se navodi koliko je prostora na disku potrebno. S pomoću značajke Manage Files (Upravljanje datotekama) oslobodite potrebnu količinu prostora na računalu instrumenta.</p>
X Network Connection Active (Aktivna mrežna veza)	<p>Provjerite je li mrežni kabel priključen u instrument.</p> <p>Ako se time ne uspostavi mrežna veza, na zaslonu Manage Instrument (Upravljanje instrumentom) odaberite Reboot (Ponovno pokreni) da biste ponovno pokrenuli softver.</p> <p>Ako se veza i dalje ne može uspostaviti, na zaslonu Manage Instrument (Upravljanje instrumentom) odaberite Shut Down (Isključi) pa isključite instrument putem prekidača za napajanje. Pričekajte najmanje 60 sekundi, a potom uključite instrument i pokrenite softver.</p>
X Primary Analysis Ready (Spremnost primarne analize)	<p>Nije dovršena primarna analiza prethodne obrade. Zadano vrijeme za dovršetak primarne analize iznosi jedan sat, a na zaslonu se prikazuje brojač vremena. Možete pričekati jedan sat ili odabrati Terminate Analysis (Prekini analizu). Zaustavit će se sekundarna analiza svih nedovršenih ciklusa.</p>

Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a

Pogreške RFID-a aktiviraju se u sljedećim situacijama:

- umetnuta komponenta nije dio kompleta za *in vitro* dijagnostiku
- umetnuta komponenta nije dio kompleta navedenog u modulu softvera Local Run Manager
- došlo je do tehničkog kvara pri očitavanju RFID oznake na komponenti

Da biste riješili RFID kvarove čiji je uzrok tehnički kvar, možete učiniti sljedeće.

NAPOMENA Tijekom dijagnostičke obrade dopuštena je jedna pogreška očitavanja RFID-a. Ako nije moguće očitati RFID na dvije komponente potrošnog materijala, softver ne može nastaviti na sljedeći korak postavljanja obrade. Ako dođe do te pogreške, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

Protočni članak

1. Prije nastavka obavezno ponovno pokušajte očitati RFID. Da biste to učinili, otvorite i zatvorite vratašca odjeljka za protočni članak.
2. Ako i očitavanje RFID-a ne uspije ni drugi put, odaberite **Get Code** (Dohvaćanje koda). Obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste nabavili privremeni kôd za zaobilaženje RFID-a. Privremeni kôd za zaobilaženje istječe nakon sedam dana.
3. S pomoću zaslonske tipkovnice unesite privremeni kôd za zaobilaženje.
4. Odaberite **Next** (Dalje).
5. Unesite sljedeće podatke:
 - broj crtičnog koda protočnog članka, koji se nalazi na naljepnici spremnika protočnog članka izravno ispod samog crtičnog koda
 - kataloški broj protočnog članka
6. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na zaslon Load the Flow Cell (Umetanje protočnog članka).
7. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na sljedeći korak postavljanja obrade.

Boca Otopina SBS MiSeqDx (PR2)

1. Prije nastavka obavezno ponovno pokušajte očitati RFID. Da biste to učinili, podignite, a potom spustite ručku dozatora.
2. Ako i očitavanje RFID-a ne uspije ni drugi put, odaberite **Get Code** (Dohvaćanje koda). Obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste nabavili privremeni kôd za zaobilaženje RFID-a. Privremeni kôd za zaobilaženje istječe nakon sedam dana.
3. S pomoću zaslonske tipkovnice unesite privremeni kôd za zaobilaženje.
4. Odaberite **Next** (Dalje).
5. Unesite sljedeće podatke:

- broj crtičnog koda boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2), koji se nalazi na naljepnici boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2) neposredno ispod crtičnog koda
 - kataloški broj boce Otopina SBS MiSeqDx (PR2)
6. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na zaslon Load Reagents (Umetanje reagensa).
 7. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na sljedeći korak postavljanja obrade.

Uložak reagensa

1. Prije nastavka obavezno ponovno pokušajte očitati RFID. Da biste to učinili, otvorite, a potom zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
2. Ako i očitavanje RFID-a ne uspije ni drugi put, odaberite **Get Code** (Dohvaćanje koda). Obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste nabavili privremeni kôd za zaobilazanje RFID-a. Privremeni kôd za zaobilazanje istječe nakon sedam dana.
3. S pomoću zaslonske tipkovnice unesite privremeni kôd za zaobilazanje.
4. Odaberite **Next** (Dalje).
5. Unesite sljedeće podatke:
 - broj crtičnog koda kompleta reagensa, koji se nalazi na naljepnici kompleta izravno ispod crtičnog koda
 - kataloški broj kompleta reagensa
6. Odaberite **Next** (Dalje) da biste se vratili na zaslon Load Reagents (Umetanje reagensa).
7. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na sljedeći korak postavljanja obrade.

Sprječavanje ponovnog pokretanja tijekom obrade

Ako se MiSeqDx ponovno pokrene tijekom obrade, to može značiti da je softver Windows Update na mreži konfiguriran tako da automatski instalira ažuriranja softvera. Tu je postavku bilo potrebno isključiti tijekom instalacije. Obratite se lokalnom informatičkom odjelu za pomoć pri onemogućivanju automatskih ažuriranja operacijskog sustava Windows u pozadini instrumenta MiSeqDx.

Otklanjanje poteškoća zbog pogreške brzine protoka

Brzina protoka predstavlja brzinu kojom tekućine prolaze kroz sustav fluida ($\mu\text{l}/\text{min}$). Mjeri se prije svake obrade tijekom provjere prije obrade. Ako sustav ne može izmjeriti brzinu protoka, upumpajte određeni volumen reagensa (Otopina SBS MiSeqDx (PR2)) kroz sustav prije ponovne provjere brzine protoka.

1. S pomoću padajućeg popisa ili zaslonske tipkovnice unesite sljedeće podatke:
 - Solution (Otopina): **PR2**
 - Volume (Volumen): **250 μl**
 - Aspirate Rate (Brzina aspiracije): **2500 $\mu\text{l}/\text{min}$**
 - Dispense Rate (Brzina izbacivanja): **2500 $\mu\text{l}/\text{min}$**

2. Odaberite **Pump** (Pumpaj).
3. Kad završi korak pumpanja, odaberite **Restart Check** (Ponovno pokreni provjeru).
4. Ako se pogreška i dalje pojavljuje, volumen pumpanja Otopina SBS MiSeqDx (PR2) postavite na 500 µl pa još jedanput ponovite postupak. Ako ni iz drugog pokušaja ne uspijete otkloniti pogrešku, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

Testiranje volumena

Začepljenje u vodovima za fluide može uzrokovati slab dovod reagensa te utjecati na rezultate sekvenciranja. Ako sumnjate na začepljenje u vodovima za fluide, testirajte volumen.

Testiranjem volumena provjerava se stanje sustava fluida tako što se procjenjuje volumen između dvaju mjehurića koji prolaze pokraj senzora. Da biste testirali volumen, u instrument moraju biti umetnuti plitica za ispiranje i boca za ispiranje s vodom laboratorijske kvalitete te iskorišten protočni članak. Da biste proveli testiranje, slijedite upute na zaslonu.

1. Provjerite je li u instrument umetnut iskorišteni protočni članak.
2. U glavnom izborniku odaberite **System Check** (Provjera sustava).
3. Odaberite **Conduct Volume Test** (Provedi testiranje volumena), a potom **Next** (Dalje).
4. Svaki spremnik plitice za ispiranje ispunite sa 6 ml vode laboratorijske kvalitete.
5. Bocu za ispiranje od 500 ml napunite s 350 ml vode laboratorijske kvalitete.
6. Umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje u instrument.
 - a. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok ne zastane. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
 - b. Podižite ručku dozatora dok se ne blokira na mjestu pa umetnite bocu za ispiranje.
 - c. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
 - d. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
7. Slijedite upute na zaslonu pa na sljedeći način uklonite eventualne kapljice s boce za ispiranje:
 - a. Na upit polako podignite ručku dozatora te provjerite nalazi li se na dozatoru boce za ispiranje velika kap vode.
 - b. Na upit polako spustite ručku dozatora u vodu do te razine da površinska napetost ukloni kap.
 - c. Na upit polako podignite ručku dozatora te provjerite nalazi li se na dozatoru boce za ispiranje velika kap vode.
 - d. Na upit polako spustite ručku dozatora do kraja da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.

8. Odaberite **Next** (Dalje). Pokrenut će se testiranje volumena.

Nakon dovršetka testiranja volumena na zaslonu se prikazuju rezultati.

Ako testiranje nije bilo uspješno, provedite ispiranje radi održavanja. Pogledajte [Postupak na stranici 30](#).

9. Nakon dovršetka ispiranja radi održavanja ponovite testiranje volumena.

Rješavanje pogrešaka s temperaturom hladnjaka reagensa

Potrebni je temperaturni raspon hladnjaka reagensa od 2 °C do 11 °C. Indikator senzora pokazuje temperaturu hladnjaka reagensa. Pogledajte [Indikatori senzora na stranici 5](#).

Ako se pojavi poruka o pogrešci da temperatura hladnjaka nije u navedenom temperaturnom rasponu, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Illumina.

Ako temperatura hladnjaka nije unutar navedenog raspona, obrada sekvenciranjem možda se neće moći pokrenuti. Ako poruku o pogrešci primite tijekom obrade sekvenciranjem, pričekajte da obrada završi.

Dodatne informacije o hladnjaku reagensa potražite u odjeljku [Odjeljak za reagense na stranici 3](#).

Rješavanje pogrešaka analize Local Run Manager

Informacije o otklanjanju poteškoća u vezi s pogreškama analize zatražite od tehničke podrške tvrtke Illumina. *Referentni priručnik za softver Local Run Manager v4 za MiSeqDx (broj dokumenta 200046657)* sadrži upute za ponovno pokretanje analize.

Konfiguracija postavki sustava

MOS sadrži kartice s kojih se pristupa naredbama za konfiguraciju sustava.

- Postavke IP-a i DNS-a konfiguriraju se na kartici IP. Za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows.
- Postavke mreže i pokretanja konfiguriraju se na sljedećim karticama:
 - Network Credentials (Vjerodajnice za mrežu) – za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows.
 - Start-Up Options (Mogućnosti pokretanja) – za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora softvera Local Run Manager.

Te se postavke sustava najčešće konfiguriraju tijekom instalacije instrumenta MiSeqDx.

Konfiguriranje postavki IP-a i DNS-a

Ako je to potrebno zbog promjene mreže ili ustanove, konfigurirajte IP adresu i adrese DNS poslužitelja. Za konfiguriranje te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows.

1. U glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu IP, a zatim jednu od sljedećih mogućnosti da biste postavili IP adresu:
 - **Obtain an IP address automatically** (Automatski dohvati IP adresu) – tu mogućnost odaberite da bi se IP adresa dohvaćala automatski putem poslužitelja protokola za dinamičku konfiguraciju glavnog računala (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol).

NAPOMENA Protokol za dinamičku konfiguraciju glavnog računala (DHCP) standardni je mrežni protokol koji se upotrebljava na IP mrežama za dinamičku raspodjelu mrežnih konfiguracijskih parametara.

- **Use the following IP address** (Upotrijebi sljedeću IP adresu) – tu mogućnost odaberite ako instrument s drugim poslužiteljem želite povezati ručno, i to na sljedeći način. Da biste saznali koje adrese pripadaju baš vašoj ustanovi, obratite se mrežnom administratoru.
 - Unesite IP adresu. IP adresa niz je od četiri broja odvojenih točkom, primjerice 168.62.20.37.
 - Unesite masku podmreže, što je daljnja podjela IP mreže.
 - Unesite zadani pristupnik – mrežni usmjernik koji povezuje lokalna računala s internetom.
3. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste postavili adresu DNS-a:
 - **Obtain a DNS address automatically** (Automatski dohvati adresu DNS-a) – čita adresu DNS-a povezanu s IP adresom.
 - **Use the following DNS addresses** (Upotrebljavaj sljedeće adrese DNS-a) – instrument se povezuje s poslužiteljem koji nazive domena prevodi u IP adrese.
 - Unesite željenu DNS adresu. DNS adresa naziv je poslužitelja koji se upotrebljava za prevođenje naziva domena u IP adrese.
 - Unesite rezervnu adresu DNS-a. Rezerva se upotrebljava ako željeni DNS ne može prevesti određeni naziv domene u IP adresu.
 4. Odaberite **Save** (Spremi).

Konfiguriranje postavki mreže i pokretanja

Postavke mreže i pokretanja možete konfigurirati na kartici Network Credentials (Vjerodajnice za mrežu) (za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows) te na kartici Start-Up Options (Mogućnosti pokretanja) (potreban je pristup razine administratora softvera Local Run Manager).

1. U glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu Network Credentials (Vjerodajnice za mrežu) pa na sljedeći način konfigurirajte mrežne postavke.
3. Naziv računala dodjeljuje se računalu instrumenta u trenutku proizvodnje. Najčešće nije potrebno mijenjati naziv računala. Promjene naziva računala na ovom zaslonu mogu utjecati na povezivanje te je za njih potrebno unijeti korisničko ime i lozinku administratora mreže.
Naziv računala bilježi se kao naziv instrumenta u izlaznim podacima softvera Local Run Manager.
4. Na sljedeći način povežite računalo instrumenta s domenom ili radnom grupom.
 - **Za instrumente povezane s internetom** – odaberite **Domain** (Domena), a zatim unesite naziv domene povezane s internetskom vezom u vašoj ustanovi.
 - **Za instrumente koji nisu povezani s internetom** – odaberite **Workgroup** (Radna grupa), a zatim unesite naziv radne grupe.
5. Odaberite karticu Start-Up Options (Mogućnosti pokretanja), a potom jednu od sljedećih mogućnosti:
 - **Kiosk Mode** (Način rada kioska, preporučeno) – prikazuje sučelje upravljačkog softvera preko cijelog zaslona. Softver je namijenjen za upotrebu u načinu rada kioska.
 - **Windows Mode** (Način rada za Windows) – omogućuje pristup sustavu Windows na računalu instrumenta. U tom načinu rada interakcija sa sučeljem softvera, primjerice položaj gumba, može biti drugačija.
6. Odaberite **Save** (Spremi).

Izlazne mape

Mape obrade

Svakom obradom na instrumentu MiSeqDx generiraju se tri mape obrade, a svaka od njih ima specifičnu svrhu:

- **D:\Illumina\MiSeqTemp** – kad započne obrada, na lokalni disk računala instrumenta zapisuje se privremena mapa obrade koja služi kao radno područje za MOS i RTA. Mapi Temp (Privremena) nije potrebno pristupati. Sadržaj te mape briše se nakon sedam dana.
- **D:\Illumina\MiSeqOutput** – RTA kopira datoteke iz mape Temp (Privremena) u mapu Output (Izlaz). Kad se generiraju datoteke primarne analize, RTA kopira datoteke natrag u mapu Temp (Privremena) i popunjava mapu Analysis (Analiza). Fokusirane slike i minijature slika ne kopiraju se u mapu Analysis (Analiza).
- **D:\Illumina\MiSeqAnalysis** – kad se dovrši primarna analiza, Local Run Manager pristupa mapi Analysis (Analiza) na lokalnom disku instrumenta da bi započeo sekundarnu analizu. Sve datoteke zapisane u mapu Analysis (Analiza) kopiraju se u mapu Output (Izlaz).

Naziv korijenske mape

Naziv korijenske mape obrade sadržava datum obrade, broj instrumenta te protočni članak upotrijebljen za obradu. Za svaku obradu, svaka mapa obrade sadrži isti naziv korijenske mape.

Naziv mape po zadanim postavkama izgleda ovako:

GGMMDD_<BrojInstrumenta>_<BrojObrade>_A<CrtičniKodProtočnogČlanka>

Broj obrade povećava se za jedan nakon svake obrade na tom instrumentu.

Tehnička pomoć

Ako vam je potrebna tehnička pomoć, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

Internetska stranica: www.illumina.com

E-pošta: techsupport@illumina.com

Sigurnosno-tehnički listovi (SDS-ovi) – dostupni su na internetskoj stranici tvrtke Illumina na adresi support.illumina.com/sds.html.

Dokumentacija o proizvodima – dostupna je za preuzimanje na internetskoj stranici support.illumina.com.



Illumina, Inc.
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 SAD
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (izvan Sjeverne Amerike)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Naručitelj za Australiju
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australija

ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.

© 2026. Illumina, Inc. Sva prava pridržana.

illumina®